

Məhsul Qrupu

Virtual siçan basın xüsusiyyətləri və nitq çıxışı ilə Bu smart on-ekran klaviatura sürətli yazaraq və hardware klaviatura və ya kompüter siçan və ya yalnız hissələri istifadə edilə bilməz, hətta kompüter ilə iş imkan verir.

OnScreenKeys, hər hansı bir proqrama yazmaq, mətn emal proqramı, elektron tablo proqramı, e-poçt proqramı və ya internet brauzerini daxil etmək üçün istifadə edilə bilər.

OnScreenKeys tez-tez toxunma ekranlı sistemlərdə və ya göz izci, baş siçanlar və bir çox başqa alternativ giriş cihazı ilə birlikdə istifadə olunur..

Belə klaviatura ölçüsü və iş sürəti Import parametrləri sərbəst düzəlişlər edilə bilər.
Mətn makro və xüsusi ifadələr daha asan yazaraq etmək.

OnScreenKeys 40-dan çox dildən ibarətdir və tez xarici dillərdə dəyişən mətnlər tez bir zamanda yazıla və kompüter səsləri ilə danışa biləcək şəkildə tez dəyişməyə imkan verir.

OnScreenKeys quraşdırılmış sistem səslərindən istifadə edir və hər hansı digər SAPI səsinə qoşulmağa imkan verir.

Yalnız "Deluxe" versiyasında mövcuddur

ÇOX SAĞ OL

Hörmətli istifadəçi!

OnScreenKeys seçdiyiniz üçün çox sağ olun.

Biz sizin üçün effektiv və fəaliyyət üçün hələ asan proqram yaratmaq üçün bizim çox yaxşı çalışdıq.

OnScreenKeys daim təkmilləşdirilmişdir. Updates bizim web yükləmək olar.

Biz məhsul gözləntiləri cavab ümid edirik.

Mən proqram çalışır siz çox fun arzulaıram.

Tom Weber

MƏHSUL aktivasiya

Proqram Aktivləşdirmə 60 gün sınaq müddəti sonra lazımdır.

Proqram aktivləşdirmək üçün növbəti səhifə, eləcə də proqram installing fərdi yaradılan InstallationKey bilər ProductKey lazımdır. Bu yüklü sonra məhsul yalnız aktivləşdirilə bilər deməkdir.

OnScreenKeys aktivləşdirmək üçün aşağıdakı kimi davam edin:

1

Bilgisayarınıza **OnScreenKeys** bərpa edin və proqramı başladın.

2

"**Mən proqram alınmış və indi onu aktivləşdirmək üçün istəyirəm.**" seçimini seçin.
Daha sonra "**Tamam**" düyməsini basın.

3

a) Kompüteriniz internetə qoşulduqda, müvafiq mətn qutusunda ProductKey daxil edin.

b) Kompüteriniz internetə qoşulduqda, "**Internet bağlantısı olmadan aktivləşdir**" düyməsini basın və ekrandakı təlimatları izləyin.

SİZİN PRODUCTKEY

Sizin ProductKey edir:

Quraşdırma

Bir kompüterdə **OnScreenKeys** təslim olunduqda, kompüterinizin CD-ROM sürücüsünə qoyun. Quraşdırma avtomatik olaraq başlayacaq.

CD-dən quraşdırma avtomatik olaraq başlamasa, CD-də **osk_setup_dvd.exe** əl ilə başlamalıdır.

GİRİŞ

Proqram **OnScreenKeys** ümumi hardware klaviatura və ya kompüter siçanını istifadə edə bilməyən insanlar üçün yazma və kommunikasiya vasitələridir.

Proqram istifadəçi üçün avtomatik düymələri və mouse düymələri tıklayaraq edir. İstifadəçi sadəcə sonra müəyyən bir əbədi zaman sonra avtomatik olaraq səbəb olacaq istənilən düyməyə siçan pointer hərəkət etmək lazımdır.

Hər hansı digər bir pəncərə (məsələn, mətn emal proqramı, internet brauzeri və s.) Mətn göndərə bilməsi üçün, həmişə digər pəncərələrin üstündə **OnScreenKeys** göstərilir.

"Kliklə" və "Deluxe" versiyasında **OnScreenKeys** fare tıklamalarının klaviatura kənarında da həyata keçirilə biləcəyi bir siçan vurma xüsusiyyətini təmin edir.

OnScreenKeys "Deluxe" versiyası, kompüterin hoparlörleri tərəfindən yazılmış mətnin verilə biləcəyi bir kompüter səsli çıxış variantını təmin edir. SAPI standart uyğun hər hansı bir kompüter səsləri Integration asanlıqla mümkündür.

FIRST START

Proqramı başlatmaq üçün masaüstünüzdəki "**OnScreenKeys**" simgesini basın və ya başlanğıc menyusunda "**OnScreenKeys**" proqram qrupundan çağırın.

Proqram avtomatik olaraq Windows versiyası dil aşkar və müvafiq olaraq özü yapılandırır edəcək.

Siz konfigurasiya pəncərə fərqli dil, eləcə də edit çox parametrləri seçə bilərsiniz. Siz ekranda klaviatura Ayarlar 'düyməsinə tıklayaraq Configuration pəncərə açə bilər.

BASICS XÜLASƏ

OnScreenKeys (normal kompüter klaviaturası ilə yazarkən olduğu kimi) yazmaq üçün bir mətn pəncərəsi açıq olmalıdır və yanib sönən kursurun həmin pəncərədə görünməsi lazımdır.

Proqram əvvəlində, bir mətn redaktoru avtomatik olaraq açılacaq.

Siz Konfigurasiya Window bu funksiyayı deactivate və ya digər mətn redaktoru seçə bilərsiniz.

Ekranda klaviatura düymələri tetiklemek üçün, sadəcə istədiyiniz əsas üzərində mouse pointer hərəkət və bir az müddət orada saxlamaq lazımdır. əsas avtomatik müəyyən əbədi zaman sonra tıklayan olunacaq.

Konfigurasiya pəncərə siz bu avtomatik klik funksiyası deactivate ya əbədi vaxt dəyişə bilər.

Word avtomatik tamamlama və söz proqnozlaşdırılması

OnScreenKeys cüt sürətli tipli dəstək verir:

> Word Auto-başla: Kimi tezliklə yeni bir sözü ilk məktub tipli kimi, söz təkliflər bir klik ilə yazın bilər 10 söz düymələri nümayiş olunacaq.

> Next-Word-Təklif: Kimi tezliklə bir söz başla kimi, 10 ən ehtimal növbəti sözləri göstərilir.

Yazı Style adaptasiya

OnScreenKeys default olaraq hərtərəfli bir lüğət təqdim edir. Əgər siz onları yazın və yazı üslubu qəbul kimi Bundan əlavə, proqram təminatı, yeni sözlər və cümlələr öyrənir.

Bundan əlavə, şəxsi sənədlər və məktublar proqram hətta sürətli yazı üslub uyğunlaşmaq etmək üçün idxal edilə bilər.

Söz və Text Macros

Siz düyməsinə klik ilə əvvəl saxlanılır qısa ifadələr və ya bütün bəndlərə yazı bilərsiniz.

Bu mövzu haqqında daha ətraflı məlumat təqib pages tapa bilərsiniz.

Danışiq (yalnız "Deluxe" versiyasında)

Activated çıxış çıxış hər tipli cümlə daxil edin əsas bir mətbuat danışiq olacaq. Enter düyməsinə sonra yenidən bərk halda, son cümlə bir daha danışiq olacaq.

OnScreenKeys hər bir sözü yazıldıqdan dərhal danışmaq üçün konfigurasiya edə bilərsiniz.


Avtomatik işə salma

Windows® ilə avtomatik olaraq **OnScreenKeys** açma bilərsiniz.

Bu seçim "Əlavələr" sekmesindəki Konfigurasiya Pəncərəsində aktivləşdirilə və ya silinə bilər.

Hardware klaviatura fərqlər

Bu normal hardware kompüter klaviatura aşkar etmək deyil düymələri və funksiyaları haqqında ümumi edir:

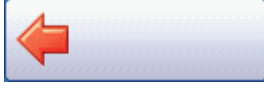

Açar sil

Son düyməsini siler



Word sil

Son sözü siler



Əsas Settings

Konfigurasiya pəncərə açır



Basın Pause

Müvəqqəti Auto-basın aradan bırakır

Eyni düyməsini bir klik ilə yenidən aktiv olunur qədər kilidi tetiklemesini tərəfindən, Auto-Click funksiyası durdurulmuş olacaq.




Genişləndirilmiş Keys

Daha düymələri (e. g. riyaziyyat düymələri) və xüsusi əməlləri göstərir



Word Shift Key

Keçən tipli söz-nin işi dəyişikliklər

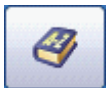

Sözlük / Dil dəyişdirin

Müvəqqəti dil dəyişir

Müvafiq düymələr, lüğət və kompüter səsləri yeni seçilmiş dilə uyğun olaraq müəyyən edilir.



Müvəqqəti olaraq Disable / Enabled Speech Output



Daxil edin (və son cümlə danışmaq)

MOUSE BAR ("Klik" və "Deluxe" versiyalarında mövcuddur)

Normal kompüter siçanlarının düymələrini basaraq probleminiz varsa, siçan tıklamalarını **OnScreenKeys** ilə təqlid edə bilərsiniz.

Siçan etmək lazımdır basın haqqında düşünmək üçün zaman ayırın (e. g. sadə klik, cüt basın, sağ basın və ya Drag & Drop basın)..

Masa üstü bir fayl açmaq üçün, misal üçün, bir cüt basın etmək lazımdır. müvafiq siçan klik (aşağıda bax) seçin və basın edilməli yeri siçan pointer hərəkət. Qısa sonra mouse klik avtomatik ki, yeri edilə edəcək.



Bu düyməsini bir klik Mouse Button Bar açır:



Mouse klik növü Baxış:



Sol Click (sadə basın)



Cüt basın



Sağ klikləyin



Sürükle və Bırak




Klik funksiyaları & yaxın siçan düyməsini bar çıxın


Siçan klik parametrləri (e. g. hərəkət tolerantlıq, radius, tremor tolerantlıq və s) konfigurasiya pəncərə düzəlişlər edilə bilər.

SPEECH ÇIXIŞI (yalnız "Deluxe" versiyası)


Çıxış çıxışını aşağıdakı düyməyə basaraq aktivləşdirmək / ləğv etmək olar:

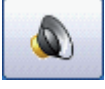

Mövcud vəziyyəti aşağıdakı nişanlar bir asılı olaraq nümayiş olunacaq:

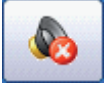

Speech çıxış ləğv

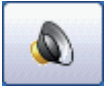

Speech çıxış aktiv



Mövcud deyil səbəbiylə səhv nitqi çıxış



Səs output satın versiyası mövcud deyil.

Çıxış çıxış funksiyası aktiv olarsa the key səbəb daxil zaman, hər yazdığınız line çıxış mühərrik göndəriləcək.

Return əsas yenidən bərk halda, son cümlə yenidən danışmaq olacaq.

OnScreenKeys hər bir sözü yazıldıqdan dərhal danışmaq üçün konfigurasiya edə bilərsiniz.

İstifadə edəcək olan kompüter səsləri **OnScreenKeys** konfigurasiya pəncərəsində seçilə bilər.

Siz çox dildə ünsiyyət, siz hər dil üçün müxtəlif səs seçə bilərsiniz.

IFADƏLƏR

A söz tez-tez istifadə olunacaq mətn modul, e. g. s öz adı və poçt ünvanı,

OnScreenKeys -da 10-a qədər söz qurula bilər

Ifadələr qurulması:

Konfigurasiya Pəncərəsini açın və "Mətn Makroları" sekmesini basın.

Mövcud söz siyahıdan bir söz seçin istədiyiniz əgər, adını dəyişmək, və seçdiyiniz bir mətn mətn əvəz.

Daha sonra, redaktə edilmiş sözün altındakı "**Yadda saxla**" düyməsini basın.
Daha sonra başqa bir söz redaktə ilə davam edə bilər.

Sözləri redaktə edərkən konfigurasiya pəncərələrini "Saxla" düyməsini basın.

Ifadələr yazaraq:

Kart qutusu düyməsini basın.



Sizin xüsusi ifadələr indi söz düymələri görünür.

Onun əsas mətn yazılı etmək üçün düymələri birini basın.

Mətn makro

Mətn makro funksiyası köməyi ilə bəndlərin sonsuz sayda yazıla bilər.

Onların namings sonra əvvəlcədən yazılı mətn ibadət etmək lazımdır, çünki A ardıcıl adlandırma sxemi tövsiyə olunur.

Mətn makro yaradılması:

Konfigurasiya Pəncərəsini açın və "Mətn makroları" sekmesini basın.

Sağdakı sahədə "Yeni" düyməsini basın, daha sonra bir ad və sonra yazılacaq mətni daxil edin.

Daha sonra "Yeni" düyməsini basın.

İndi yeni bəndlərə daxil ola bilərsiniz.

Text makro Invoking:

Klaviatura Sharp Bürc (#) basın.

Sharp əlaməti görünən deyil, Shift düyməsini basın.

10 söz proqnozlaşdırılması düymələri biri göstərir qədər bir mətn makro adını yazaraq başlayın.

Saxlanılan mətn yazılı üçün müvafiq söz proqnozlaşdırılması düyməsini basın.

Heç bir mətn makro söz proqnozlaşdırılması düyməsinə göstərilir (mətn makro bütün Sharp xarakteri ilə (#) başlayacaq) varsa, hələ bufer məktublar var. Belə olan halda, sonra ilk əsas Enter basın Sharp işarəsi basın və daha əvvəldən başlamaq.

GÜNCELLEME

Bu veb pulsuz yenilikləri və yeni funksiyalar haqqında dövri xəbər verir:

<https://www.onscreenkeys.com>

Tənqid və təkliflər

Programımızla bağlı bir şey sizin ehtiyaclarınızı mükəmməl şəkildə yerinə yetirmədikdə və ya **OnScreenKeys** yaxşılaşdırmaq üçün hər hansı bir təklifiniz varsa, bizə məlumat verərdiniz.

Bir e-poçt yazın

mail@tomwebersoftware.com

DƏSTƏK

Məsləhətçi / distribyutor:

Manuel versiya: 1.2 (fevral 2019)