

DESKRIPSI PRODUK

Pintar ini keyboard pada layar dengan fitur klik mouse virtual dan keluaran suara memungkinkan untuk mengetik cepat dan bekerja dengan komputer bahkan jika hardware keyboard atau mouse komputer tidak dapat atau hanya di bagian digunakan.

OnScreenKeys dapat digunakan untuk mengetik ke aplikasi apa pun, baik itu perangkat lunak pengolah teks, program spreadsheet, perangkat lunak eMail atau browser internet.

OnScreenKeys sering digunakan pada sistem layar sentuh atau dalam kombinasi dengan eye tracker, kepala mouse dan banyak perangkat masukan alternatif lainnya..

Parameter impor seperti ukuran keyboard dan kecepatan kerja dapat disesuaikan secara bebas. Macro teks dan frase pribadi membuat mengetik lebih mudah.

OnScreenKeys berisi lebih dari 40 bahasa dan memungkinkan perubahan bahasa cepat sehingga bahkan teks bahasa asing dapat dengan cepat diketik dan dituturkan oleh suara komputer.

OnScreenKeys menggunakan suara sistem yang terinstal dan juga memungkinkan koneksi ke suara SAPI lainnya.

Hanya tersedia dalam versi "Deluxe"

TERIMA KASIH

Sayang pengguna!

Terima kasih banyak telah memilih **OnScreenKeys**.

Kami mencoba yang terbaik untuk membuat sebuah program yang efektif dan masih mudah dioperasikan untuk Anda.

OnScreenKeys terus ditingkatkan. Update dapat didownload dari website kami.

Kami berharap bahwa produk kami memenuhi harapan Anda.

Saya berharap Anda lebih menyenangkan di mencoba perangkat lunak.

Tom Weber

PRODUK AKTIVASI

Setelah masa percobaan 60 hari mengaktifkan perangkat lunak yang diperlukan.

Untuk mengaktifkan perangkat lunak, Anda akan membutuhkan productKey yang dapat ditemukan di halaman berikutnya serta InstallationKey yang akan dihasilkan secara individual di installing perangkat lunak. Ini berarti bahwa produk hanya dapat diaktifkan setelah telah diinstal.

Lanjutkan sebagai berikut untuk mengaktifkan **OnScreenKeys**:

1

Pasang **OnScreenKeys** di komputer Anda, lalu jalankan perangkat lunaknya.

2

Pilih opsi "**Saya membeli perangkat lunak dan ingin mengaktifkannya sekarang.**". Setelah itu klik tombol "**Setuju**".

3

a) Jika komputer Anda terhubung ke internet, masukkan ProductKey Anda ke kotak teks yang sesuai.

b) Jika komputer Anda terhubung ke internet, klik tombol "**Aktifkan tanpa koneksi internet**", dan ikuti petunjuk di layar.

ProductKey ANDA

ProductKey Anda:

INSTALASI

Jika **OnScreenKeys** dikirim ke CD, masukkan ke drive CD-ROM komputer Anda. Instalasi akan dimulai secara otomatis.

Jika penginstalan dari CD tidak dimulai secara otomatis, **osk_setup_dvd.exe** pada CD harus dimulai secara manual.

PENGANTAR

Perangkat lunak **OnScreenKeys** adalah alat bantu pengetikan dan komunikasi untuk orang-orang yang tidak dapat menggunakan keyboard perangkat keras umum atau mouse komputer.

Perangkat lunak ini tidak mengklik tombol dan tombol mouse secara otomatis untuk pengguna. Pengguna hanya perlu untuk memindahkan pointer mouse ke tombol yang dikehendaki yang kemudian akan memicu secara otomatis setelah waktu tinggal tertentu.

OnScreenKeys selalu ditampilkan di atas jendela lain sehingga Anda dapat mengirim teks ke jendela lain (e. G. Perangkat lunak pengolah teks, browser internet, dll.).

Di bagian "Klik" dan di versi "Deluxe" **OnScreenKeys** menyediakan fitur klik mouse yang dapat digunakan klik mouse di luar keyboard.

Versi "Deluxe" dari **OnScreenKeys** menyediakan opsi pidato suara komputer yang bisa digunakan oleh teks yang diketik oleh loudspeaker komputer. Integrasi setiap suara komputer yang sesuai dengan standar SAPI mudah mungkin.

MULAI PERTAMA

Untuk memulai perangkat lunak, klik ikon "**OnScreenKeys**" di desktop Anda, atau ajukan dari grup program "**OnScreenKeys**" di menu awal.

Perangkat lunak ini secara otomatis akan mendeteksi bahasa versi Windows Anda dan mengkonfigurasi sendiri sesuai.

Anda dapat memilih bahasa yang berbeda serta mengedit banyak parameter di jendela konfigurasi. Anda bisa membuka Window Konfigurasi dengan mengklik tombol Settings pada keyboard di layar.

DASAR GAMBARAN

Untuk mengetik dengan **OnScreenKeys** (seperti saat mengetik dengan keyboard komputer normal) jendela teks harus terbuka, dan kursor yang berkedip perlu terlihat di jendela itu.

Pada program start, editor teks akan dibuka secara otomatis.

Anda mungkin deactive fungsi ini di Window Konfigurasi atau memilih editor teks lain.

Untuk memicu tombol pada keyboard di layar, Anda hanya harus memindahkan pointer mouse di atas tombol yang dikehendaki dan tetap di sana untuk sementara. Kuncinya secara otomatis akan diklik setelah waktu tinggal tertentu.

Pada jendela konfigurasi Anda mungkin deactive fungsi auto-klik atau mengubah waktu tinggal.

Kata auto-completion dan prediksi kata

OnScreenKeys menyediakan dukungan jenis cepat ganda:

> Kata Auto-Completion: Segera setelah Anda mengetik huruf pertama dari kata baru, kata saran akan ditampilkan di 10 tombol kata yang Anda dapat mengetik dengan satu klik.

> Next-Word-Saran: Segera setelah Anda selesai satu kata, 10 kata berikutnya yang paling mungkin akan ditampilkan.

Menulis Style Adaptasi

OnScreenKeys menyediakan kamus komprehensif secara default. Selain itu, perangkat lunak belajar kata-kata baru dan kalimat saat Anda mengetik mereka dan mengadopsi gaya tulisan Anda.

Selain itu, dokumen pribadi dan surat dapat diimpor untuk membuat perangkat lunak beradaptasi dengan gaya tulisan Anda lebih cepat.

Frase dan Macro Teks

Anda dapat menulis frasa pendek atau seluruh paragraf yang telah disimpan sebelumnya oleh klik pada tombol.

Informasi lebih lanjut tentang topik ini dapat ditemukan pada halaman berikut.

Berbicara (hanya tersedia dalam versi "Deluxe")

Pada pidato output Activated setiap kalimat yang diketik akan diucapkan pada pers pada tombol Enter. Jika tombol Enter kemudian ditekan lagi, kalimat terakhir akan diucapkan sekali lagi.

Anda dapat mengonfigurasi **OnScreenKeys** sehingga setiap kata diucapkan segera setelah mengetikkannya.

Mulai otomatis

Anda mungkin memiliki **OnScreenKeys** secara otomatis memulai dengan Windows®.

Pilihan ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan di Jendela Konfigurasi pada tab "Ekstra".

PERBEDAAN TO HARDWARE KEYBOARD

Ini adalah gambaran tentang kunci dan fungsi yang tidak dapat ditemukan di normal keyboard komputer hardware:



Hapus Key

Menghapus tombol terakhir



Hapus kata

Menghapus kata terakhir



Pengaturan dasar

Membuka jendela konfigurasi



Klik-Jeda

Sementara menonaktifkan Auto-Click

Dengan memicu kunci, fungsi Auto-Click akan berhenti sampai sedang diaktifkan lagi dengan klik pada tombol yang sama.




Keys diperpanjang

Menunjukkan kunci lanjut (e. G. Kunci matematika) dan perintah khusus



Kata Pergeseran Key

Perubahan terjadi diketik kata terakhir ini

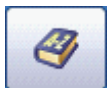

Ubah Kamus / Ubah Bahasa

Sementara mengubah bahasa

Tombol yang sesuai, kamus dan suara komputer akan diatur sesuai dengan bahasa yang baru dipilih.



Menonaktifkan Sementara / Output Pidato Diaktifkan



Masukkan (dan berbicara kalimat terakhir)

MOUSE BAR (tersedia dalam versi "Klik" dan "Deluxe" saja)

Jika Anda memiliki masalah menekan tombol mouse komputer normal, Anda dapat meniru klik mouse dengan **OnScreenKeys**.

Luangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang yang klik mouse Anda akan perlu untuk melakukan (e. G. Klik sederhana, klik dua kali, klik kanan atau Drag & Drop klik)..

Misalnya untuk membuka file pada desktop, Anda akan perlu melakukan klik dua kali. Pilih klik mouse yang sesuai (lihat di bawah), dan memindahkan pointer mouse ke lokasi di mana klik harus dilakukan. Setelah beberapa saat klik mouse secara otomatis akan dilakukan di lokasi itu.



Sebuah klik pada tombol ini membuka Tombol Mouse Bar:



Mouse jenis klik gambaran:



Meninggalkan Klik (klik sederhana)



Klik ganda



Klik kanan



Seret dan jatuhkan



Keluar klik fungsi & dekat tombol mouse bar

Parameter klik mouse (e. G. Toleransi gerakan, jari-jari, toleransi tremor, dll) dapat disesuaikan dalam jendela konfigurasi.

SPEECH OUTPUT (versi "Deluxe" saja)

Output ucapan dapat diaktifkan / dinonaktifkan oleh klik pada tombol berikut:



Tergantung pada status salah satu ikon berikut akan ditampilkan:



Keluaran suara dinonaktifkan



Keluaran suara diaktifkan



Keluaran suara tidak tersedia karena kesalahan



Suara tidak tersedia pada versi yang anda beli.

Jika fungsi keluaran suara diaktifkan, setiap baris diketik akan dikirim ke mesin pidato ketika tombol enter dipicu.

Jika tombol Kembali ditekan lagi, kalimat terakhir akan diucapkan lagi.

Anda dapat mengonfigurasi **OnScreenKeys** sehingga setiap kata diucapkan segera setelah mengetikkannya.

Suara komputer yang akan digunakan oleh **OnScreenKeys** dapat dipilih di jendela konfigurasi.

Jika Anda berkomunikasi dalam beberapa bahasa, Anda dapat memilih suara yang berbeda untuk setiap bahasa.

PHRASES

Sebuah frase adalah modul teks yang akan sering digunakan, e. g. nama Anda sendiri dan alamat pos, dll

Hingga 10 frasa dapat disiapkan di **OnScreenKeys**

Menyiapkan frase:

Buka Jendela Konfigurasi, dan klik tab "Text Macros".

Pilih frase dari daftar frasa yang tersedia, mengubah nama itu jika diinginkan, dan mengganti teks dengan teks pilihan Anda.

Setelah itu, klik tombol "**Menyimpan**" yang terletak di bawah frasa yang baru saja diedit. Anda kemudian dapat melanjutkan dengan mengedit kalimat lain.

Bila sudah selesai mengedit ungkapan, klik tombol konfigurasi windows "Save".

Mengetik frase:



Klik tombol kotak kartu.

Frase disesuaikan Anda sekarang akan muncul di tombol kata.

Klik salah satu tombol untuk memiliki teks yang mendasarinya tertulis.

Macro TEXT

Dengan bantuan teks fungsi makro jumlah tak terbatas paragraf dapat ditulis.

Sebuah skema penamaan yang konsisten dianjurkan karena Anda akan perlu untuk memanggil teks pra-ditulis kemudian oleh namings mereka.

Membuat macro text:

Bukalah Jendela Konfigurasi dan klik tab "Text Macros".

Klik tombol "New" di area di sisi kanan, lalu masukkan nama dan teks yang nantinya harus ditulis.

Setelah itu klik tombol "**Baru**".

Sekarang Anda dapat memasukkan paragraf baru.

Meminjam Macro Teks:

Klik Masuk tajam (#) pada keyboard.

Jika tanda tajam tidak terlihat, klik tombol Shift.

Mulai mengetik nama makro teks sampai muncul di salah satu tombol prediksi 10 kata.

Klik tombol prediksi kata yang tepat untuk memiliki teks yang tersimpan ditulis.

Jika tidak ada macro text (teks macro semua dimulai dengan karakter tajam (#)) ditampilkan dalam tombol prediksi kata, masih ada huruf dalam buffer. Dalam kasus seperti itu klik tombol Enter pertama, kemudian klik tanda Sharp, dan mulai dari awal lagi.

UPDATES

Website ini menyediakan berita berkala tentang update gratis dan fitur baru:

<https://www.onscreenkeys.com>

KRITIK DAN SARAN

Kami akan senang jika Anda memberi tahu kami jika ada sesuatu tentang perangkat lunak kami yang tidak memenuhi kebutuhan Anda dengan sempurna atau jika Anda memiliki saran tentang cara memperbaiki **OnScreenKeys**.

Silahkan menulis eMail ke

mail@tomwebersoftware.com

MENDUKUNG

Penasihat / distributor Anda:

Versi manual: 1.2 (mulai Februari 2019)