

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Овој интелигентен тастатурата на екранот со виртуелни функции клик на глумчето и говор излез овозможува брзо пишување и работа со компјутер, дури и ако не може или само во делови да се користи хардвер тастатура или на компјутерски глушец.

OnScreenKeys може да се користи за внесување во било која апликација, било да е софтвер за обработка на текст, програма за табеларни пресметки, софтвер за е-пошта или интернет-пребарувач.

OnScreenKeys често се користи во системи со допир на екран или во комбинација со око tracker, главини и многу други алтернативни влезни уреди..

Увоз параметри, како што се големината на тастатурата и работни брзина може слободно да се прилагоди.

Текст макроа и персоналните фрази направи пишување многу полесно.

OnScreenKeys содржи повеќе од 40 јазици и овозможува брзо менување на јазикот, така што дури и текстовите на странски јазик можат брзо да се напишат и да се изговораат со гласот на компјутерот.

OnScreenKeys ги користи инсталираните гласови на системот и исто така овозможува поврзување со кој било друг SAPI глас.

Достапни само во верзијата "Делукс"

ТИ БЛАГОДАРАМ

Почитувани корисник!

Ви благодарам многу за изборот на **OnScreenKeys**.

Се обидовме многу потрудиме да се создаде ефикасен и се уште лесно да се работи програма за вас.

OnScreenKeys постојано се подобрува. Ажурираните податоци може да бидат превземени од нашиот вебсајт.

Се надеваме дека нашиот производ ги исполнува вашите очекувања.

Ви посакувам многу забавно во обидот на софтверот.

Tom Weber

Продуктната активација

По период од 60 дена пробен период активирање на софтвер е потребно.

За да ја активирате софтвер, ќе ви треба ProductKey кој може да се најде на следната страница, како и InstallationKey кои ќе бидат генерирани поединечно на инсталацијата на софтверот. Ова значи дека производот може да се активира само откако ќе ја инсталирате.

Продолжете како што следува за да го активирате **OnScreenKeys**:

1

Инсталирајте **OnScreenKeys** на вашиот компјутер и стартувајте го софтверот.

2

Изберете ја опцијата "**Го купив софтверот и сакам да го активирам.**".
Потоа кликнете на копчето "**Во ред**".

3

a) Ако вашиот компјутер е поврзан на интернет, внесете го вашиот ProductKey во соодветното поле за текст.

b) Ако вашиот компјутер е поврзан на интернет, кликнете на копчето "**Активирајте без интернет конекција**" и следете ги инструкциите на екранот.

ВАШИОТ PRODUCTKEY

Вашиот ProductKey е:

ИНСТАЛАЦИЈА

Ако **OnScreenKeys** е доставен на ЦД, ставете го во CD-ROM-от на вашиот компјутер.
Инсталацијата ќе започне автоматски.

Ако инсталацијата од ЦД-то не започне автоматски, **osk_setup_dvd.exe** на CD-то треба да се стартува рачно.

ВОВЕД

Софтверот **OnScreenKeys** е помош за пишување и комуникација за луѓе кои не можат да ја користат заедничката хардверска тастатура или компјутерски глушец.

Софтверот не кликување на копчињата и на глумчето автоматски за корисникот. Корисникот само треба да го движите покажувачот до саканото копче, која потоа ќе се активира автоматски по одредено време живеат.

OnScreenKeys секогаш се прикажува на други прозорци за да може да испраќате текст во кој било друг прозорец (на пример, софтвер за обработка на текст, интернет прелистувач итн.).

Во "Кликнете" и во верзијата "Делукс" **OnScreenKeys** обезбедува функција за кликање со глумчето, со што кликовите со глумци можат да се извршат и надвор од тастатурата.

Верзијата на "Делукс" на **OnScreenKeys** обезбедува опција за говор за говор за компјутерот преку кој може да излезе отчукуваниот текст од звучниците на компјутерот. Интеграција на било кој компјутер гласови кои се во согласност со стандардот за SAPI е лесно е можно.

Прво стартување

За да го стартувате софтверот, кликнете на иконата "**OnScreenKeys**" на вашата работна површина или повикајте ја од програмската група "**OnScreenKeys**" во менито за старт.

Софтверот автоматски ќе го детектира јазикот на вашиот Windows® верзија и да се конфигурира за тоа.

Може да изберете друг јазик, како и уредување на многу параметри во прозорецот за конфигурација. Вие може да се отвори прозорецот за конфигурација со кликување на копчето Поставувања на тастатурата на екранот.

Основи ПРЕГЛЕД

За да напишете со **OnScreenKeys** (исто како кога пишувате со нормална тастатура на компјутер) текстуален прозорец мора да биде отворен и трепкачкиот курсорот треба да биде видлив во тој прозорец.

На програмата на проектот, уредувач на текст ќе се отвори автоматски.

Може да deactivate оваа функција во прозорецот за конфигурација или изберете друг уредувач на текст.

Да се активира копчињата на тастатурата на екранот, можете само треба да го движите покажувачот на глумчето над саканото копче и да го чувате таму за малку време. Клучот автоматски ќе се кликне по извесно време живее.

Во прозорецот за конфигурација може да deactivate овој авто-клик функција или промена на живеат време.

Зборот авто-проектот и зборот во

OnScreenKeys обезбедува двојна брза поддршка за тип:

> Зборот Автоматско комплетирање: Штом сте ја напишале првата буква од нов збор, збор сугестии ќе бидат прикажани во 10 зборот копчиња кои може да го напишете со еден клик.

> Следната Збор-Предлог: Веднаш штом ќе заврши со еден збор, ќе биде прикажан на 10-те веројатно следните зборови.

Стил на пишување адаптација

OnScreenKeys стандардно обезбедува сеопфатен речник. Покрај тоа, софтверот учи нови зборови и реченици како што ги пишувате и усвојува на вашиот стил на пишување.

Покрај тоа, личните документи и писма може да се увезуваат со цел да се направи софтверот се прилагоди на вашите пишување стилови, дури и побрзо.

Фрази и текст макроа

Можете да го напишете кратки фрази или целата ставовите што сте ги зачувале порано од страна на клик на копче.

Повеќе информации за оваа тема може да се најде на страниците за следење.

Говорејќи (достапно само во верзијата "Делукс")

На actived говор излез секоја внесе реченица ќе биде изговорена по притискање на копчето Enter. Ако го копчето Enter потоа се притисне повторно, последната реченица ќе биде изговорена уште еднаш.

Може да го конфигурирате **OnScreenKeys**, така што секој збор ќе се зборува веднаш по внесувањето.

Автоматско стартување

Може да имате **OnScreenKeys** автоматски стартуван со Windows®.

Оваа опција може да биде активирана или деактивирана во Конфигурацискиот прозорец во ливчето "Додатни".

РАЗЛИКИ на хардвер ТАСТАТУРА

Ова е преглед за клучеви и функции кои што не можат да се најдат на нормална компјутерски хардвер тастатура:



Избриши буква

Брише последното копче



Избриши збор

Брише последниот збор



Основни подесувања

Отвора прозорецот за конфигурација



Кликнете-пауза

Привремено го исклучува Авто-клик

Со активирање на заклучување, функцијата Auto-клик ќе бидат прекинати додека не се активира повторно со еден клик на истото копче.




Продолжен Клучеви

Покажува понатамошно клучеви (е. G. Математички клучеви) и специјални команди



Зборот Shift копчето

Менување случај во изминативе внесе зборот

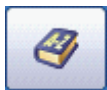

Промени речник / Смени јазик

Привремено го менува јазикот

Соодветните копчиња, речникот и гласот на компјутерот ќе бидат поставени според новоизбраниот јазик.



Излез за говорно исклучување / овозможување на говор



Внесете (и зборува последната реченица)

БИЗНИЦА (достапно само во "Кликни" и "Делукс" верзија)

Ако имате проблеми со притискање на копчињата на нормалниот компјутерски глушец, може да имитирате кликувања со глумчето со **OnScreenKeys**.

Земете еден миг да се размислува за кои клик на глумчето ќе треба да се направи (е. Г. Едноставен клик, двоен клик, десен клик или Драг и зависници клик)..

На пример, со цел да се отвори датотеката на работната површина, ќе треба да се направи двоен клик. Изберете ја соодветната клик на глумчето (види подолу), и го движите покажувачот до локацијата каде што треба да се направи на клик. По кратко време на клик на глумчето автоматски ќе се врши на таа локација.



А кликнете на ова копче се отвора копче на глушецот Бар:



Глумчето преглед тип клик:



Лев клик (едноставен клик)



Двоен клик



Десен клик



Повлечете капка



Напушти клик Функции и блиски копче на глумчето бар

Параметри на глумчето клик (е. г. толеранција движење, радиус, тремор толеранција, итн) може да се прилагоди во прозорецот за конфигурација.

ИЗВРШЕН РЕЗУЛТАТ (само верзија "Делукс")

Излезниот говор може да се активира / деактивира со кликување на следното копче:



Во зависност од моменталната состојба на еден од следниве икони ќе бидат прикажани:



Говор излез деактивира



Говор излез активира



Говор излез не се достапни поради грешка



Гласовниот водич не е овозможен во верзијата која Вие ја купивте.

Ако е активирана функцијата за говор излез, секој напишан линија ќе бидат испратени на говорот моторот кога Enter копчето се активира.

Ако на копчето за враќање повторно се притисне, последната реченица ќе биде изговорена повторно.

Може да го конфигурирате **OnScreenKeys**, така што секој збор ќе се зборува веднаш по внесувањето.

Гласот на компјутерот што **OnScreenKeys** ќе го користи може да биде избран во прозорецот за конфигурација.

Ако комуницираат во повеќе јазици, можете да изберете различни глас за секој јазик.

ФРАЗИ

Синтагмата текст модул кој ќе се користи често, е. г. свој име и поштенска адреса, итн

Може да се постават до 10 фрази во **OnScreenKeys**

Поставување фрази:

Отворете го прозорецот за конфигурација и кликнете на табулаторот "Текст макроа".

Изберете една фраза од листата на достапни фрази, ја преименува ако сакате, и да го замени текст со текстот на вашиот избор.

Потоа кликнете на копчето "**Зачувај**" кое се наоѓа под фразата која штотуку беше изменета. Тогаш може да се продолжи со уредување на уште една фраза.

Кога ќе завршите со уредување на фрази, кликнете на копчето "Зачувај" на прозорецот за конфигурација.

Пишување фрази:



Кликнете на копчето за кутија картичка.

Вашиот кориснички фрази кои се користат да се појави на копчињата од зборот.

Кликнете на едно од копчињата со цел да имаат нејзините основни напишаниот текст.

ТЕКСТ макроа

Со помош на макро функција на текстот може да се внесе бесконечен број на ставови.

А шема согласност за именување се препорачува, бидејќи ќе треба да се повика на претходна писмена текст подоцна од страна на нивните именувања.

Креирање макроа текст:

Отворете го прозорецот за конфигурација и кликнете на табулаторот "Текст макроа".

Кликнете на копчето "Нова" во областа на десната страна, потоа внесете име и текст кој подоцна треба да биде напишан.

Потоа кликнете на копчето "**Нови**".
Сега можете да влезат на нови ставови.

Повикувајќи се на текст макроа:

Кликнете на Остро знак (#) на тастатурата.
Ако Шарп знак не е видливо, кликнете на копчето Shift.

Започне со пишување на името на еден текст макро, додека таа се појавува во едно од копчињата за 10 збор предвидување.

Кликнете на соодветното копче збор предвидување да се чуваат текст напишан надвор.

Ако нема текст макроа (текст макроа почнат со остар карактер (#)) се прикажани во копчето збор предвидување, се уште има букви во тампон. Во таков случај, кликнете на Enter првиот клуч, а потоа кликнете на Остро знак, и да почне од почеток.

Надградби

Сајтов нуди периодични вести за бесплатни надградби и нови функции:

<https://www.onscreenkeys.com>

Критики и сугестии

Ќе ни биде мило ако ни кажете дали нешто во врска со нашиот софтвер не ги задоволува вашите потреби совршено или ако имате какви било предлози за тоа како да го подобрите **OnScreenKeys**.

Ве молиме напишете e-mail на

mail@tomwebersoftware.com

ПОДДРШКА

Вашиот советник / дистрибутер:

Рачна верзија: 1.2 (од февруари 2019)