

## ONSCREENKEYS **5**

Windows XP<sup>®</sup> / Windows Vista<sup>®</sup> / Windows 7<sup>®</sup> / Windows 8<sup>®</sup> / Windows 10<sup>®</sup>

## รายละเอียดของสินค้า

นี่เป็นพิมพ์บนหน้าจอสมาร์ทที่มีคุณสมบัติการคลิกเมาส์เสมือนและเอาต์พุตเสียงช่วยให้การพิมพ์ที่รวดเร็วและการทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้ว่าคีย์บอร์ดหรือเมาส์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถหรือเฉพาะในส่วนที่นำมาใช้


\u003cPRODUCTNAME\u003e สามารถใช้ในการพิมพ์ลงในโปรแกรมใด ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อความโปรแกรมสเปรดชีตซอฟต์แวร์อีเมลหรืออินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

\u003cPRODUCTNAME\u003e มักจะถูกใช้ในระบบหน้าจอสัมผัสหรือใช้ร่วมกับติดตามตา mouses  
ศีรษะและอุปกรณ์ป้อนข้อมูลทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย .

พารามิเตอร์นำเข้าเช่นขนาดของแป้นพิมพ์และความเร็วในการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ  
แม้โครข้อความส่วนบุคคลและวลีที่ทำให้การพิมพ์ง่ายมาก

\u003cPRODUCTNAME\u003e มีมากกว่า 40  
ภาษาและช่วยให้การเปลี่ยนภาษาอย่างรวดเร็วเพื่อที่ตำราแม่กระทั่งภาษาต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วสามารถพิมพ์  
และพูดด้วยเสียงคอมพิวเตอร์

\u003cPRODUCTNAME\u003e ใช้เสียงระบบที่ติดตั้งและยังช่วยให้การเชื่อมต่อกับเสียง SAPI อื่น ๆ.  
ใช้ได้เฉพาะใน \ รุ่น Deluxe\

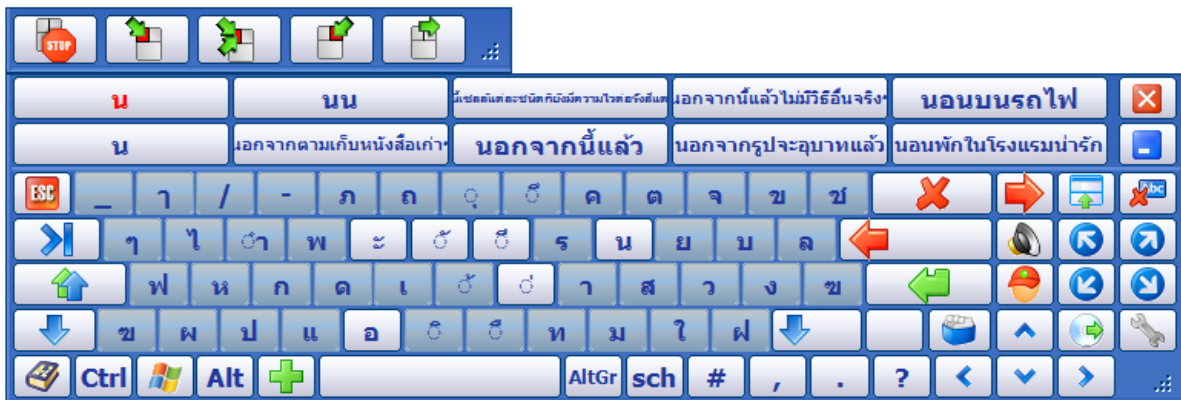

## ขอขอบคุณ

ผู้ใช้ที่รัก!

ขอบคุณมากสำหรับการเลือก \u003cPRODUCTNAME\u003e

เราพยายามที่ดีที่สุดของเราในการสร้างที่มีประสิทธิภาพและยังง่ายต่อการใช้งานโปรแกรมสำหรับคุณ

\u003cPRODUCTNAME\u003e อย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุง อัปเดตสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเรา

เราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราตามความคาดหวังของคุณ

หากคุณมีคำถามใด ๆ ที่คุณอาจจะส่งถึงเรา...

... โดยโทรศัพท์: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

... โดยอีเมล: [mail@tomweber-software.com](mailto:mail@tomweber-software.com)

ฉันหวังว่าคุณจะสนุกมากที่พยายามที่ซอฟต์แวร์

# Tom Weber

## เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

หลังจากระยะเวลาทดลองใช้ 60 วันเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจำเป็น

เพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่คุณจะต้อง ProductKey ซึ่งสามารถพบได้ในหน้าถัดไปเช่นเดียวกับ InstallationKey ซึ่งจะถูกรสร้างขึ้นที่ละ installing ซอฟต์แวร์ ซึ่งหมายความว่าสินค้าที่สามารถเปิดใช้งานหลังจากที่มันได้รับการติดตั้ง

ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน \u003cPRODUCTNAME\u003e:

- 1 ติดตั้ง \u003cPRODUCTNAME\u003e บนคอมพิวเตอร์ของคุณและเริ่มต้นซอฟต์แวร์
- 2 เลือกตัวเลือก \ Select the option \ .  
หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม \ Afterwards click the button \ .
- 3 a) หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตป้อน ProductKey ของคุณในช่องที่เหมาะสม  
หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม \ \u003cBUTTONNAME\u003e\ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ  
b) หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตคลิกที่ปุ่ม \ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ  
\u003cBUTTONNAME\u003e\

## ProductKey ของคุณ

---

ProductKey ของคุณคือ:

## การติดตั้ง

---

ถ้า \u003cPRODUCTNAME\u003e ถูกส่งในแผ่นซีดีใส่ไว้ในไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์ของคุณ การติดตั้งจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

หากการติดตั้งจากแผ่นซีดีไม่เริ่มทำงานอัตโนมัติ \u003cPRODUCTFILENAMEEXE\u003e บนแผ่นซีดีควรจะเริ่มติดตั้งด้วยตนเอง

## บทนำ

ซอฟต์แวร์ \u003cPRODUCTNAME\u003e

เป็นพิมพ์โรเคดส์และการสื่อสารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะใช้พิมพ์ฮาร์ดแวร์ทั่วไปหรือเมาส์คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ที่ไม่คลิกที่ปุ่มและปุ่มเมาส์โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้

ผู้ใช้เพียงความต้องการที่จะย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่ปุ่มที่ต้องการซึ่งจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่อาศัยอยู่บาง

\u003cPRODUCTNAME\u003e จะแสดงอยู่ด้านบนเสมอของหน้าต่างอื่น ๆ

เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังหน้าต่างอื่น ๆ ( e. g. ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อความ , อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อื่น ๆ )

ใน \ และใน \ รุ่น \u003cPRODUCTNAME\u003e

มีคุณสมบัติการคลิกเมาส์โดยที่คลิกเมาส์สามารถดำเนินการได้แม้เกินเป็นพิมพ์ Click\ Deluxe\

ว่า \ รุ่น \u003cPRODUCTNAME\u003e

ให้เป็นตัวเลือกคำพูดเสียงคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการพิมพ์ข้อความที่สามารถส่งออกจากลำโพงของคอมพิวเตอร์

Deluxe\ บุรณาการของเสียงเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SAPI เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

## เริ่มต้นครั้งแรก


เพื่อเปิดโปรแกรมให้คลิกที่ไอคอน \ บนเดสก์ทอปของคุณหรือเรียกได้จากกลุ่มโปรแกรม \ ในเมนูเริ่มต้น

\u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\

ซอฟต์แวร์จะตรวจสอบภาษารุ่น Windows® ของคุณโดยอัตโนมัติและกำหนดค่าตัวเองตาม

คุณสามารถเลือกภาษาที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับการแก้ไขปัจจัยหลายประการในหน้าต่างการตั้งค่า

คุณอาจจะเปิดหน้าต่างการตั้งค่าโดยคลิกที่ปุ่มการตั้งค่าบนเป็นพิมพ์บนหน้าจอ

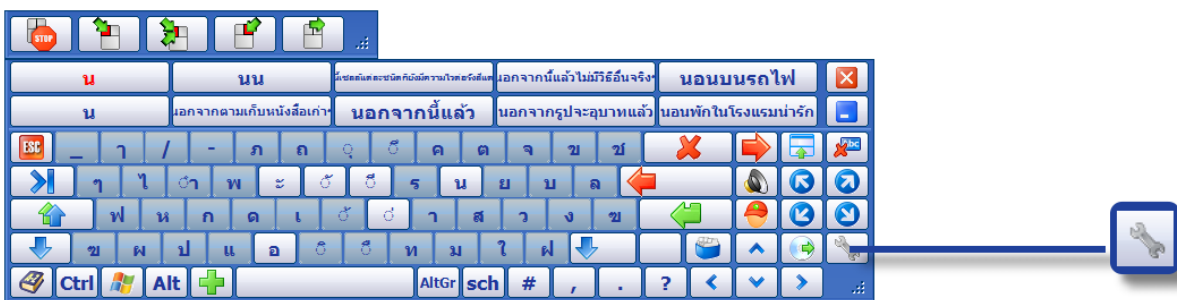

## พินฐานภาพรวม

ในการพิมพ์ด้วย \u003cPRODUCTNAME\u003e (เช่นเดียวกับเมื่อพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ปกติ) หน้าต่างข้อความจะต้องมีการเปิดและเคอร์เซอร์จะพริบมีความต้องการที่จะมองเห็นได้ในหน้าต่างที่

ในช่วงเริ่มต้นโปรแกรมแก้ไขข้อความจะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  
คุณอาจจะ deactivate ฟังก์ชันนี้ในหน้าต่างการตั้งค่าหรือเลือกแก้ไขข้อความอื่น

ที่จะเรียกปุ่มบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอคุณเพียงต้องย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่สำคัญที่ต้องการและให้มันมีในขณะทีน้อย  
ที่สำคัญจะได้รับการคลิกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาอยู่บาง

ในหน้าต่างการตั้งค่าที่คุณอาจ deactivate นี้ฟังก์ชันอัตโนมัติคลิกหรือเปลี่ยนแปลงเวลาอยู่

คำว่าอัตโนมัติเสร็จและคำทำนาย

\u003cPRODUCTNAME\u003e ให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็วประเภทคู่:

> คำว่าอัตโนมัติแล้วเสร็จ: เร็วที่สุดเท่าที่คุณพิมพ์อักษรตัวแรกของคำใหม่คำที่แนะนำจะแสดงในปุ่มค่า 10  
ซึ่งคุณอาจจะพิมพ์โดยการคลิก

> คำต่อไปที่ข้อเสนอแนะ: ทันทีที่คุณเสร็จหนึ่งคำ 10 คำต่อไปน่าจะเป็นที่สุดจะปรากฏ

สไตล์การเขียนการปรับตัว

\u003cPRODUCTNAME\u003e มีพจนานุกรมครอบคลุมโดยคำเริ่มต้น นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ  
และประโยคที่คุณพิมพ์พวกเขาและทำผิดกฎหมายให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณ

นอกจากนี้เอกสารส่วนบุคคลและตัวอักษรที่สามารถนำเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ปรับให้เข้ากับรูปแบบการเขียนของคุณได้เร็ว  
ว

วลีและแม่โครข้อความ

คุณอาจจะเขียนวลีสั้น ๆ หรือทั้งย่อหน้าที่คุณเก็บไว้ก่อนโดยการคลิกที่ปุ่ม  
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้สามารถพบได้ในหน้าต่างต่อไปนี้

การพูด (ใช้ได้เฉพาะใน \ รุ่น) Deluxe\

ที่การส่งออกการพูดแต่ละประโยค Actived พิมพ์จะถูกพูดที่กดบนปุ่ม Enter ถ้าปุ่ม Enter  
กดแล้วอีกครั้งประโยคสุดท้ายจะพูดอีกครั้ง

คุณอาจกำหนดค่า \u003cPRODUCTNAME\u003e เพื่อให้แต่ละคำที่พูดทันทีหลังจากที่พิมพ์


เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณอาจจะมี \u003cPRODUCTNAME\u003e เริ่มต้นโดยอัตโนมัติขึ้นมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows®

ตัวเลือกนี้จะสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานในหน้าต่างการตั้งค่าในแท็บ \ This option can be activated or deactivated in the  
Configuration Window in the tab \ .

## ความแตกต่างกับฮาร์ดแวร์YBOARD

นี่คือภาพรวมเกี่ยวกับคีย์และฟังก์ชันที่ไม่ได้ที่จะพบในแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ปกติ:

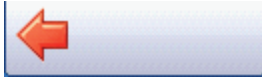

ลบตัวอักษร

ลบที่สำคัญที่ผ่านมา




ลบคำ

ลบคำสุดท้าย



การตั้งค่าพื้นฐาน

เปิดหน้าต่างการตั้งค่า

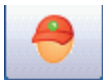

คลิกหยุดชั่วคราว

ปิดการใช้งานชั่วคราวอัตโนมัติคลิก

โดยเรียกคลิกฟังก์ชันอัตโนมัติคลิกจะถูกหยุดชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปิดใช้งานอีกครั้งโดยการคลิกที่ปุ่มเดียวกัน



คีย์ขยาย

แสดงปุ่มเพิ่มเติม ( e. g. กฎแฉคณิตศาสตร์) และคำสั่งพิเศษ



ปุ่ม Shift คำว่า


การเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้ที่คำที่พิมพ์ที่ผ่านมา



เปลี่ยนพจนานุกรม / เปลี่ยนภาษา

ชั่วคราวเปลี่ยนแปลงภาษา

คีย์ที่สอดคล้องกันในพจนานุกรมและเสียงคอมพิวเตอร์จะถูกตั้งค่าตามภาษาที่เลือกใหม่ เสียงที่ต้องการจะต้องมีการเลือกในหน้าต่างการตั้งค่าครั้งแรก (ที่มีอยู่ใน \ รุ่นเท่านั้น) Deluxe\

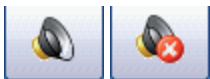

ปิดการใช้งานชั่วคราว / เอาต์พุตเสียงที่เปิดใช้งาน



Enter (และพูดประโยคสุดท้าย)

## เมาส์บาร์ (ที่มีอยู่ใน และ\ รุ่นเท่านั้น)Click\ Deluxe\

หากคุณมีปัญหา กดปุ่มเมาส์คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเลียนแบบด้วยการคลิกเมาส์ \u003cPRODUCTNAME\u003e

ใช้เวลาสักครู่ที่จะคิดเกี่ยวกับการที่คลิกเมาส์ที่คุณจะต้องทำ ( e. ก.. คลิกง่ายดับเบิลคลิก , คลิกขวาหรือ Drag \u0026amp; Drop คลิก).

ยกตัวอย่างเช่นในการสั่งซื้อที่จะเปิดไฟล์บนเดสก์ทอปที่คุณจะต้องทำดับเบิลคลิก เลือกคลิกเมาส์ที่เหมาะสม (ดูด้านล่าง) และย้ายตัวชี้เมาส์ไปยังสถานที่ที่คลิกที่ควรจะทำ หลังจากกระยะสั้นในขณะที่คลิกเมาส์จะทำได้โดยอัตโนมัติที่ตำแหน่งนั้น



คลิกที่ปุ่มนี้เปิดขึ้นปุ่มเมาส์บาร์:



เมาส์คลิกภาพรวมประเภทนี้:



คลิกซ้าย (คลิกง่าย)



ดับเบิลคลิก



คลิกขวา



Drag \u0026amp; Drop



ออกจากคลิกฟังก์ชันและใกล้แถบปุ่มเมาส์

พารามิเตอร์คลิกเมาส์ ( e. ก. ความอดทนเคลื่อนไหวหรือความอดทนสั้น ฯลฯ ) สามารถปรับเปลี่ยนได้ในหน้าต่างการตั้งค่า



## เสียงพูด ( รุ่นเท่านั้น)Deluxe\

เอาท์พุทพูดสามารถเปิดใช้งาน / ปิดการใช้งานโดยการคลิกที่ปุ่มต่อไปนี้:



ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันหนึ่งในไอคอนต่อไปนี้จะแสดง:



เอาต์พุตเสียงปิดการใช้งาน



เอาต์พุตเสียงเปิดใช้งาน



เอาต์พุตเสียงไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากข้อผิดพลาด



เอาท์พุทเสียงไม่สามารถใช้ได้ในรูปแบบที่คุณซื้อ

หากฟังก์ชันการส่งออกจะมีการใช้คำพูดทุกสายพิมพ์จะถูกส่งไปยังเครื่องยนต์พูดเมื่อป้อนคีย์จะถูกเรียก

ถ้าคีย์กลับถูกกดอีกครั้งประโยคสุดท้ายจะพูดอีกครั้ง

คุณอาจกำหนดค่า \u003cPRODUCTNAME\u003e เพื่อให้แต่ละคำที่พูดทันทีหลังจากที่พิมพ์

เสียงคอมพิวเตอร์ที่ \u003cPRODUCTNAME\u003e จะใช้สามารถเลือกได้ในหน้าต่างการตั้งค่า

หากคุณติดต่อสื่อสารในหลายภาษาคุณอาจเลือกเสียงที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละภาษา

## วลี

วลีเป็นโมดูลข้อความซึ่งจะถูกใช้บ่อย E ก. ชื่อของตนเองและที่อยู่ ฯลฯ

ถึง 10 วลีที่สามารถตั้งค่าใน \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e


### การตั้งค่าความปลอดภัย:

เปิดหน้าต่างการตั้งค่าและคลิกที่แท็บ \ Open up the Configuration Window, and click the tab \ .

เลือกวลีจากรายการของวลีที่มีอยู่เปลี่ยนชื่อหากต้องการและแทนที่ข้อความด้วยข้อความที่คุณเลือก

หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม \ ที่อยู่ด้านล่างวลีที่เพิ่งได้รับการแก้ไข \u003cBUTTONNAME\u003e\ แล้วคุณอาจดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขอีกรวลี

เมื่อคุณทำแก้ไขวลีคลิกปุ่ม \ การกำหนดค่าหน้าต่างฯ Save\

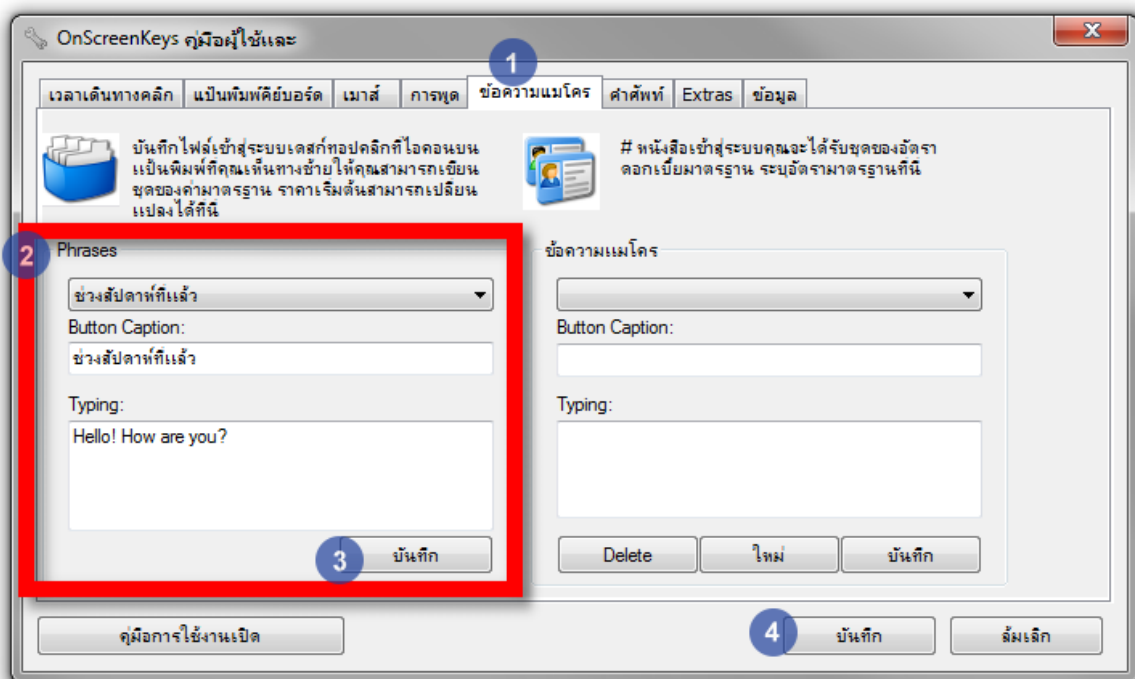

### พิมพ์วลี:

คลิกที่ปุ่มกล่องบัตร 

วลีที่กำหนดเองของคุณตอนนี้จะปรากฏในปุ่มคำว่า

คลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อให้มีพื้นฐานของข้อความที่เขียน

## แม่โครข้อความ

โดยความช่วยเหลือของฟังก์ชันแม่โครข้อความจำนวนอนันต์ของวอร์คอาจจะเขียน

โครงการการตั้งชื่อที่สอดคล้องกันขอแนะนำเพราะคุณจะต้องเรียกใช้ข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้าในภายหลังโดย namings ของพวกเขา


### สร้างแม่โครข้อความ:

เปิดหน้าต่างการตั้งค่าและคลิกแท็บ \ Open up the Configuration Window and click the tab \ .

คลิกที่ปุ่ม \ ในพื้นที่ทางด้านขวาแล้วใส่ชื่อและข้อความที่ควรจะเขียนในภายหลัง New\

หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม \ Afterwards click the button \ .

ตอนนี้คุณอาจจะใส่ย่อหน้าใหม่

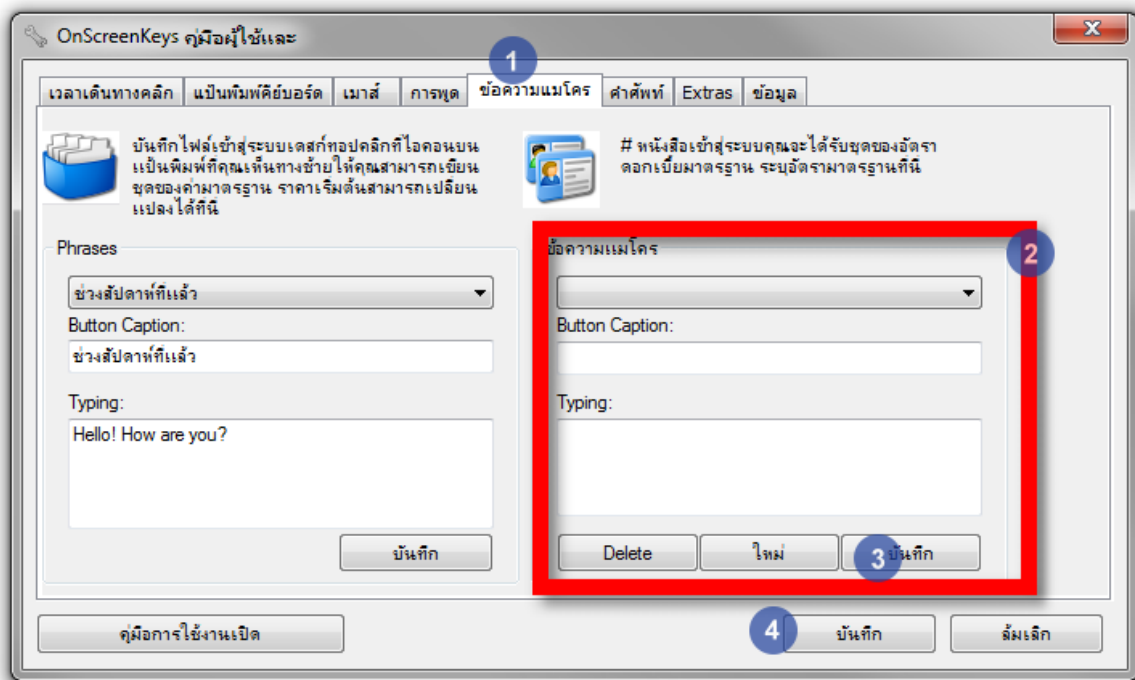

### ัญเชิญแม่โครข้อความ:

คลิกที่เครื่องหมายชาร์ป (#) บนแป้นพิมพ์  
หากสัญญาณชาร์ปมองไม่เห็นคลิกปุ่ม Shift

เริ่มพิมพ์ชื่อของแม่โครข้อความจนกว่าจะแสดงขึ้นในหนึ่งในปุ่มทำนาย 10 คำ

คลิกที่ปุ่มค่าทำนายที่เหมาะสมที่จะมีข้อความที่เก็บไว้เขียนออกมา

ถ้าไม่มีแม่โครข้อความ (แม่โครข้อความทั้งหมดเริ่มต้นด้วยตัวอักษรชาร์ป (#)) จะแสดงในปุ่มค่าทำนายยังคงมีตัวอักษรในบัฟเฟอร์ ในกรณีเช่นนี้คลิกปุ่ม Enter แรกแล้วคลิกที่เครื่องหมายชาร์ปและเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นอีกครั้ง

## สนับสนุน

---

สนับสนุนการให้บริการโดยผู้จัดจำหน่ายหรือโดยตรงจากผู้ผลิต:

tom weber software  
Damaschkestr. 18  
64297 Darmstadt  
ประเทศเยอรมัน

Tel.: 0049 - 0160-93277241  
[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## การปรับปรุง

---

เว็บไซต์นี้มีข่าวเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงฟรีและคุณสมบัติใหม่:

<http://www.onscreenkeys.com>

## วิจารณ์และข้อเสนอแนะ

---

เราจะดีใจถ้าคุณบอกเราว่าสิ่งทีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเราไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบตอบสนองความต้องการของคุณหรือถ้าคุณมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง \u003cPRODUCTNAME\u003e

กรุณาเขียนอีเมลไปยัง

[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## จำหน่ายหมายเหตุ

---

อาจารย์ที่ปรึกษา / ผู้จัดจำหน่าย: