

ONSCREENKEYS **5**

Windows XP[®] / Windows Vista[®] / Windows 7[®] / Windows 8[®] / Windows 10[®]

POPIS PRODUKTU

Tento inteligentní klávesnice na obrazovce s virtuálními funkcemi myši kliknout a hlasový výstup umožňuje rychlé psaní a práci s počítačem, i když nemůže, nebo jen v částech, bude použita ta hardwarové klávesnice nebo počítačové myši.

\u003cPRODUCTNAME\u003e lze použít vložit do libovolné aplikace, ať už je to software pro zpracování textu, tabulkový procesor programem, e-mailový software nebo internetový prohlížeč.

\u003cPRODUCTNAME\u003e je často používán na dotykové obrazovce zařízení nebo v kombinaci s oční tracker, hlavy myši a mnoho dalších alternativních vstupních zařízení..

Dovozní parametry, jako je velikost klávesnici a pracovní rychlost je možno libovolně upravovat. Textová makra a personalizované fráze dělají psaní mnohem jednodušší.

\u003cPRODUCTNAME\u003e obsahuje více než 40 jazyků a umožňuje rychlou změnu jazyka, takže i cizojazyčné texty lze rychle napsané a být mluvený počítačovým hlasem.

\u003cPRODUCTNAME\u003e používá instalovaného systému hlasy a také umožňuje připojování k jinému SAPI hlasu.

K dispozici pouze ve verzi \ available only in the \ version



DĚKUJI

Vážení uživatelé!

Děkuji moc za volbu \u003cPRODUCTNAME\u003e.

Snažili jsme se naše nejlepší vytvořit efektivní a přitom snadno ovládat program pro vás.

\u003cPRODUCTNAME\u003e se průběžně zlepšuje. Aktualizace lze stáhnout z našich webových stránek.

Doufáme, že náš výrobek splňuje vaše očekávání.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, může se k nám dostatete...

... telefonicky: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

... emailem: mail@tomweber-software.com

Přeji vám hodně zábavy na vyzkoušení softwaru.

Tom Weber

Aktivace produktu

Po 60 dnech zkušebního období aktivace softwaru je nutná.

Pro aktivaci softwaru, budete potřebovat ProductKey který lze nalézt na následující stránce, stejně jako InstallationKey, který bude vygenerován individuálně installing software. To znamená, že produkt může být aktivován pouze poté, co byl nainstalován.

Postupujte následovně aktivovat \u003cPRODUCTNAME\u003e:

- 1** Nainstaluje \u003cPRODUCTNAME\u003e k počítači a spusťte software.
- 2** Vyberte možnost \ . \u003cOPTIONNAME\u003e\
Poté klikněte na tlačítko \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\
a) Pokud je počítač připojen k internetu, zadejte ProductKey v příslušném textovém poli. Poté klikněte na tlačítko \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\
b) Pokud je počítač připojen k internetu, klikněte na tlačítko \ a postupujte podle pokynů na obrazovce. \u003cBUTTONNAME\u003e\
3

VAŠE ProductKey

Váš ProductKey je:

INSTALACE

Je-li \u003cPRODUCTNAME\u003e byl vydán na CD, vložte jej do jednotky CD-ROM počítače. Instalace se spustí automaticky.

Pokud se instalace z disku CD-ROM nespustí automaticky, \u003cPRODUCTFILENAMEEXE\u003e na disku CD-ROM by měla být zahájena ručně.

ÚVOD

Software \u003cPRODUCTNAME\u003e je psaní a komunikační pomůcky pro lidi, kteří nejsou schopni používat společnou hardwarovou klávesnici ani počítačovou myš.

Tento software dělá cvakání kláves a tlačítek myši automaticky pro uživatele. Uživatel pouze potřebuje přesunout ukazatel myši na požadovaný klíč, který pak bude automaticky spuštěna po určité časové prodlevě.

\u003cPRODUCTNAME\u003e se vždy zobrazuje nad ostatními okny, takže můžete odesílat textové zprávy do jiného okna (např. G. Pro zpracování textu software, internetový prohlížeč, atd.).

V \ a ve verzi \ \u003cPRODUCTNAME\u003e obsahuje funkci klepnutí myši, pomocí kterého lze kliknutí myši proveden i nad klávesnicí. Click\ Deluxe\


Verze \ z \u003cPRODUCTNAME\u003e poskytuje možnost je řeč elektronický hlas, jehož prostřednictvím napsaného textu mohou vystupovat od reproduktory počítače. Deluxe\ Integrace veškerých počítačových hlasů, které jsou v souladu s normou SAPI je možné snadno.

První spuštění

Chcete-li spustit software, klikněte na ikonu \ na ploše, nebo odvolávat jej z programové skupiny \ v nabídce Start. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\

Tento software automaticky detekuje jazyk vaší verze Windows a podle toho nastaví sám.

Můžete si vybrat jiný jazyk, stejně jako upravovat mnoho parametrů v okně konfigurace. Můžete otevřít okno pro konfiguraci klepnutím na tlačítko Nastavení na klávesnici na obrazovce.

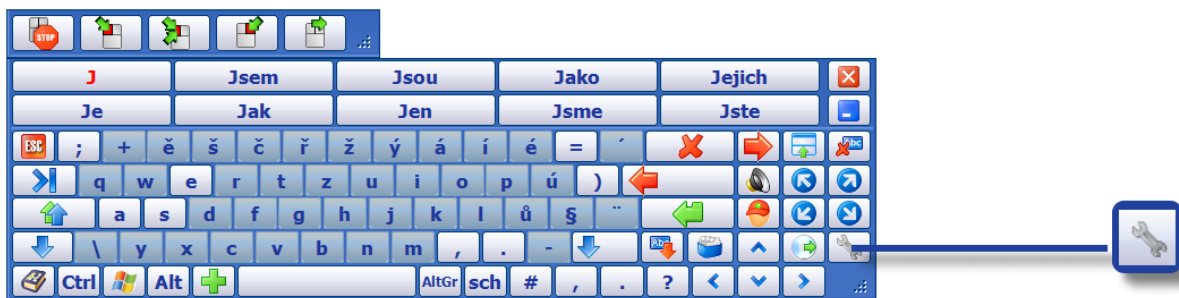

ZÁKLADNÍ PŘEHLED

Psaní pomocí \u003cPRODUCTNAME\u003e (podobně jako při psaní s běžnou počítačovou klávesnicí) textové okno musí být otevřené a blikající kurzor je třeba vidět v tomto okně.

Na startu programu bude textový editor se otevře automaticky.
Můžete Neaktivní tuto funkci v konfiguračním okně, nebo zvolit jiný textový editor.

Pro spuštění kláves na klávesnici na obrazovce, budete mít pouze přesunout ukazatel myši na požadované klávese a udržet ho tam na chvíli. Klíč se automaticky klepne po určité časové prodlevě.
V konfiguračním okně můžete Neaktivní tuto funkci auto-click nebo změnit prodlevu.

Slovo automatického dokončování slov a predikce
\u003cPRODUCTNAME\u003e poskytuje dvojí podporu rychlého typu:

> Slovo Auto-Dokončení: Jakmile jste zadali první písmeno nového slova, doporučená slova budou zobrazeny v 10 textových tlačítek, které můžete zapsat pomocí kliknutí.

> Next-Word Tip: Jakmile jste provedli jedno slovo, zobrazí se 10 nejpravděpodobnější další slova.

Psaní Style Přizpůsobení
\u003cPRODUCTNAME\u003e poskytuje komplexní slovník ve výchozím nastavení. Navíc software učí nová slova a věty jako jejich zadávání a přijímá do svého stylu psaní.
Navíc osobní dokumenty a dopisy lze importovat, aby software přizpůsobil svým stylů psaní ještě rychleji.

Fráze a textové makra
Můžete napsat krátké věty i celé odstavce, které jste uložili před tím, kliknutím na tlačítko.
Další informace o tomto tématu lze nalézt na následných stránkách.

Mluvení (k dispozici pouze ve verzi \) Deluxe\
Na active hlasovým výstupem každé napsané věty se bude mluvit na tiskové na klávesou Enter. Je-li klávesa Enter se pak znovu stisknete, bude poslední věta bude mluvit ještě jednou.
Můžete konfiguraci \u003cPRODUCTNAME\u003e tak, aby každé slovo je mluvené bezprostředně po napsáním.

Automatické spouštění
Můžete mít \u003cPRODUCTNAME\u003e automaticky spustí s Windows®.
Tato volba může být aktivována nebo deactivated v konfiguračním okně v záložce \ . Extras\

Rozdíly oproti hardwarové klávesnici

Jedná se o přehled o klíších a funkcích, které nemají být nalezeny na normální hardware klávesnici počítače:



Odstranit písmeno

Odstraní poslední klíč




Smazat slovo

Odstraní poslední slovo



Základní nastavení

Otevírá konfigurační okno

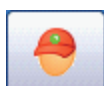

Click-Pause

Dočasně vypne auto-click

Spuštěním zámek, bude auto-click funkce se pozastaví, dokud se opět aktivuje kliknutím na stejné tlačítko.




Rozšířené Keys

Ukazuje další klávesy (např. G. Matematické klíčů) a speciální příkazy



Key Shift Word

Změní případě, že poslední slovo je zadali

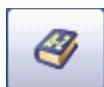

Změnit slovník / Změna jazyka

Dočasně lze změnit jazyk

Odpovídající klíče, slovníku a počítač hlas bude stanovena v soula du s nově zvoleného jazyka. Požadovaný hlas má být vybrán v okně konfigurace první (k dispozici ve verzi \ pouze). Deluxe\



Dočasně zakázat / zapnuť Hlasový výstup



Enter (a mluvit poslední věta)

MOUSE BAR (k dispozici v \ a \ verze) Click\ Deluxe\

Pokud máte problémy s stisknutého tlačítka běžné u počítačové myši, může si napodobit klepnutí myši s \u003cPRODUCTNAME\u003e.

Udělejte si chvilku přemýšlet o tom, které myši budete muset udělat (např. G. Jednoduchým kliknutím dvojitým kliknutím pravým tlačítkem nebo Drag \u0026amp; Drop click)..

Například s cílem otevřít soubor na ploše, bude nutné provést poklepaní. Vyberte vhodnou tlačítkem myši (viz níže), a přesuňte ukazatel myši na místo, kde by měl být kliknutí hotovo. Po krátké chvíli myši bude automaticky provedeno na tomto místě.



Kliknutím na toto tlačítko otevírá tlačítkem myši Bar:



Myš přehled typ kliknutí:



Levé tlačítko myši (simple click)



Dvojklik



Klikněte pravým tlačítkem myši



Drag \u0026amp; Drop



Ukončete kliknutí funkce a zavřít tlačítka myši bar

Parametry myši (e. G. Pohyb tolerance, poloměr, tolerance třes, atd.) lze nastavit v konfiguračním okně.

Hlasový výstup (\ verze) Deluxe\

Výstup řeči lze aktivovat / deaktivovat kliknutím na následující odkaz:



V závislosti na aktuálním stavu jedna z následujících ikon se zobrazí:



Hlasový výstup deaktivován



Hlasový výstup aktivován



Hlasový výstup není k dispozici kvůli chybě



Hlasový výstup není k dispozici ve verzi, které jste zakoupili.

Je-li aktivována funkce hlasový výstup, bude mít každý napsaný řádek být zaslán k motoru řeči, když Enter se spustí.

Po opětovném stisknutí tlačítka Return bude poslední věta znovu promluvil.

Můžete konfiguraci \u003cPRODUCTNAME\u003e tak, aby každé slovo je mluvené bezprostředně po napsáním.

Počítač hlas, který \u003cPRODUCTNAME\u003e budou používat lze zvolit v konfiguračním okně.

Máte-li komunikovat v několika jazycích, můžete si vybrat jiný hlas pro každý jazyk.

FRÁZE

Fráze je textový modul, který se často používá, e. G. své vlastní jméno a poštovní adresu, atd.

Až 10 vět lze nastavit v \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

Nastavení fráze:

Otevřete okno pro konfiguraci a klepněte na záložku \ . Text Macros\


Vyberte si frázi ze seznamu dostupných frází, přejmenujte jej v případě potřeby, a nahraďte text textem podle svého výběru.

Poté klikněte na tlačítko \ , který je umístěn pod frází, která byla právě editována.

\u003cBUTTONNAME\u003e\

Poté můžete pokračovat s úpravou jinou frází.

Při dokončení úprav slova, klikněte na tlačítko \ Konfigurační okna. Save\

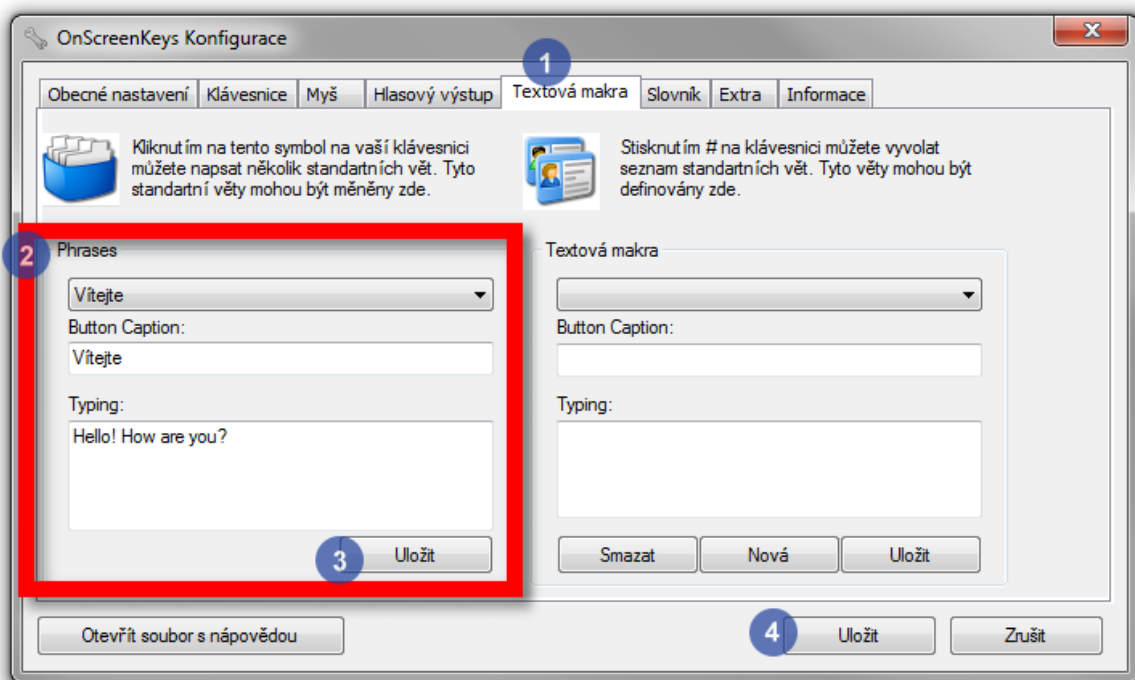

Zadáním fráze:



Klepněte na tlačítko karty box.

Vaše přizpůsobené fráze se objeví v tlačítek slovo.

Klepněte na jedno z tlačítek, aby se její základní text psaný.

Textová makra

Pomocí textového funkci makro může být zapsáno nekonečně mnoho bodů.


Schéma konzistentní pojmenování se nedoporučuje, protože budete muset vyvolat předem napsaný text později jejich namings.

Vytvoření textových maker:

Otevřete okno pro konfiguraci a klepněte na záložku \ . Text Macros\

Kliknutím na tlačítko \ v této oblasti na pravé straně, pak zadejte název a text, který by měl být později písemné. New\

Poté klikněte na tlačítko \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\ Nyní můžete zadat nové body.

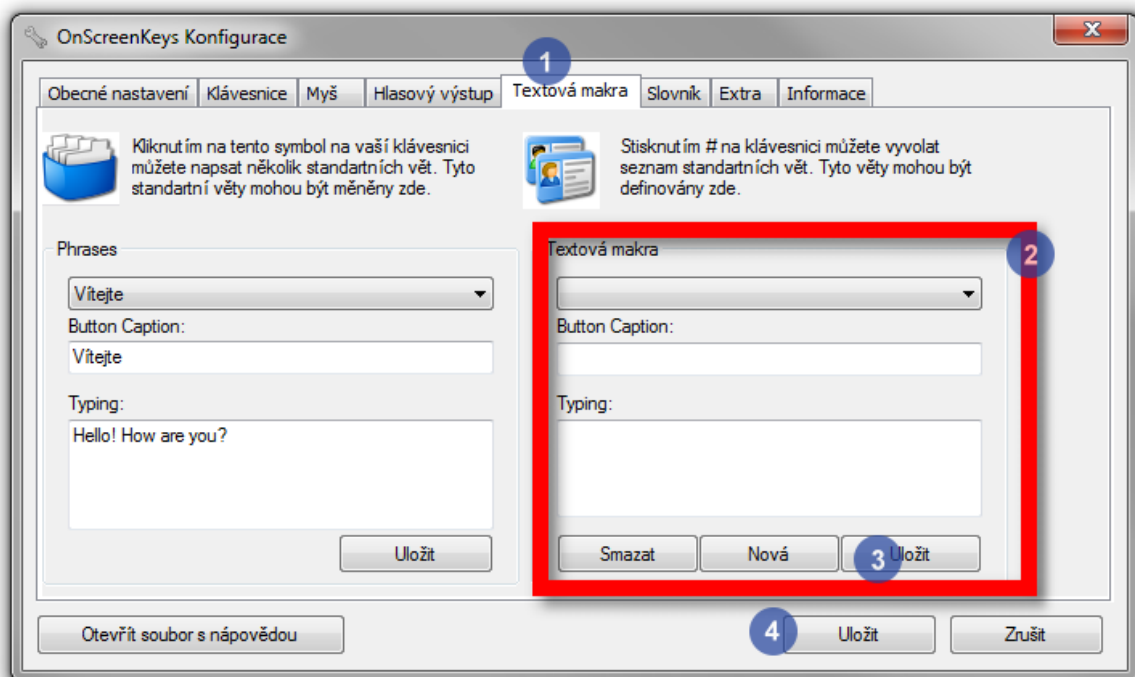

Vyvolání textu makra:

Kliknutím na Sharp Sign (#) na klávesnici.

V případě, že Sharp značka není vidět, klepněte na klávesu Shift.

Začněte psát název textového makra, dokud se objeví v jednom z 10 tlačítek predikce slov.

Kliknutím na příslušné tlačítko slovo predikce mít uložený text psaný ven.

Pokud žádné textové makra (textová makra všichni začínají s ostrým znakem (#)) jsou zobrazeny v tlačítku slovo predikce, stále existují písmena ve vyrovnávací paměti. V takovém případě klikněte na klávesu Enter, poté klepněte na Sharp znak, a začít znovu od začátku.

PODPORA

Podpora je poskytována prostřednictvím svého distributora nebo přímo od výrobců:

tom weber software
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Německo

Tel.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

AKTUALIZACE

Tato webová stránka poskytuje pravidelné zprávy o bezplatných aktualizacích a nových funkcích:

<http://www.onscreenkeys.com>

Kritiku a NÁVRHY

Budeme rádi, pokud nám říct, jestli se něco o našem softwaru není dokonale vyhovovat vašim potřebám, nebo pokud máte nějaké návrhy, jak zlepšit \u003cPRODUCTNAME\u003e.

Prosím, napište email na

mail@onscreenkeys.com

DISTRIBUTOR POZNÁMKA

Váš poradce / distributor: