

PRODUKTBESKRIVELSE

Dette smarte skærmtastatur med en virtuel museklikfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med computeren selvom et hardwaretastatur eller computermus ikke eller kun delvist kan tages i brug.

OnScreenKeys kan bruges til at skrive i enhver applikation, om det er et tekstbehandlingsprogram, et regneark, et emailprogram eller en internetbrowser.

OnScreenKeys er ofte brugt på trykfølsomme skærmsystemer eller kombineret med en øje-tracker, en hovedmus eller en af de mange andre alternative input-apparater..

Importerede parametre, som tastaturets størrelse og arbejdshastighed, kan frit justeres. Tekstmakroer og personaliserede fraser gør det meget nemmere at skrive.

OnScreenKeys indeholder mere end 40 sprog og gør det nemt og hurtigt at ændre sprog så selv tekster på fremmede sprog kan hurtigt skrives og udtales af computerstemmen.

OnScreenKeys bruger den installerede systemstemme og tillader også tilkobling til enhver anden SAPI-stemme. Kun tilgængelig i "Deluxe"-versionen

TAK

Kære bruger!

Mange tak fordi du valgte **OnScreenKeys**.

Vi har gjort vores bedste for at skabe et effektivt program, som stadig er nemt at betjene, til dig.

OnScreenKeys bliver konstant forbedret. Opdateringer kan hentes fra vores hjemmeside.

Vi håber vores produkt lever op til dine forventninger.

Jeg ønsker jer god fornøjelse med at prøve softwaren.

Tom Weber

PRODUKTAKTIVERING

Efter din 60-dages prøvetid skal softwaren aktiveres.

For at aktivere softwaren skal du bruge en ProduktNøgle som kan findes på den næste side sammen med InstallationsNøglen som vil blive genereret individuelt under installationen. Dette betyder at produktet kun kan aktiveres efter installationen.

Fortsæt således for at aktivere **OnScreenKeys**:

- 1** Installer **OnScreenKeys** på din computer og start softwaren.
- 2** Vælg indstillingen "**Jeg købte programmet og ønsker nu at aktivere det.**".
Klik derefter på knappen "**Ok**".
- 3**
 - a)** Hvis din computer er forbundet til internettet, indtast din produktnøgle i den relevante tekstboks. Klik derefter på knappen "**Aktiver online nu**" og følg de videre instruktioner på skærmen.
 - b)** Hvis din computer ikke er forbundet til internettet, klik på knappen "**Aktiver uden internetforbindelse**" og følg instruktionerne på skærmen.

DIN PRODUKTNØGLE

Din ProduktNøgle er:

INSTALLATION

Hvis **OnScreenKeys** er blevet tilsendt på en CD, skal du indsætte den i computerens CD-rom drev. Installationen vil starte automatisk.

Hvis installationen fra CD'en ikke starter automatisk, skal filen **osk_setup_dvd.exe** startes manuelt fra CD'en.

INTRODUKTION

Softwaren **OnScreenKeys** er et skrive- og kommunikationshjælpværktøj for folk som ikke er i stand til at bruge normale tastaturer eller computermus.

Softwaren klarer klik på knapper på både tastaturet og musen automatisk for brugeren. Brugeren behøver udelukkende at bevæge musemarkøren til den ønskede tast som da vil udløses automatisk efter en bestemt hviletid.

OnScreenKeys er altid vist på toppen af andre vinduer så du altid kan bruge tastaturet til at skrive i dem (f.eks. et tekstbehandlingsprogram, en internetbrowser eller andet).

I "Klik" og "Deluxe"-versionerne **OnScreenKeys** er der yderligere en museklikfeature, hvor museklik kan udføres udover tastaturet.

"Deluxe"-versionen af **OnScreenKeys** tilbyder mulighed for en computerstemme, som kan læse skreven tekst højt igennem højttalerne. Der er mulighed for nem integrering af enhver computerstemme, der er i overensstemmelse med SAPI-standarderne.

FØRSTE START

For at starte softwaren, klik på ikonet "**OnScreenKeys**" på dit skrivebord, eller find det i programgruppen "**OnScreenKeys**" i startmenuen.

Softwaren vil automatisk detektere sproget som din Windows® version er af og konfigurere sig selv derefter.

Du kan vælge imellem forskellige sprog såvel som ændre mange parametre i konfigurationsvinduet. Du kan åbne konfigurationsvinduet ved at klikke på Indstillingsknappen på skærmtastaturet.

GRUNDLÆGGENDE OVERBLIK

For at skrive med **OnScreenKeys** (som når der skrives med et normalt tastatur) skal et tekstvindue være åbent, og den blinkende markør skal være synlig i dette vindue.

Ved programmets start vil en tekstredigeringsboks åbne automatisk.

Du kan deaktivere denne funktion i konfigurationsvinduet eller vælge en anden teksteditor.

For at trykke på knapperne på skærmtastaturet skal du bare bevæge musemarkøren over den ønskede knap og holde den der i et kort stykke tid. Knappen vil automatisk blive klikket på efter en bestemt tid.

I konfigurationsvinduet kan du deaktivere denne autoklik-funktion eller ændre tiden før der klikkes.

Automatisk ordfærdiggørelse og ordforudsigelse

OnScreenKeys tilbyder garanti for fordobling af skrivehastighed:

> Automatisk ordfærdiggørelse: så snart du har indtastet det første bogstav i et nyt ord vil ordforslag blive vist i de 10 ordknapper som du så kan klikke.

> Næste-ord-forslag: Så snart du har færdiggjort et ord, vil de 10 mest sandsynlige næste ord blive vist.

Intelligent ordprædiktion

OnScreenKeys har en omfattende ordbog indbygget. Softwaren lærer nye ord og sætninger når du skriver dem og tilpasser sig din skrivestil.

Desuden kan personlige dokumenter og bogstaver importeres for at personliggøre softwaren hurtigere.

Fraser og tekstmakroer

Du kan skrive korte fraser eller hele paragraffer som du vil have gemt før ved et tryk på en knap.

Yderligere information om dette emne kan findes på følgende sider.

Tale (kun tilgængelig i "Deluxe"-versionen)

Når taleoutput er aktiveret vil hver eneste skrevne sætning blive udtalt ved tryk på Enter-knappen. Hvis Enterknappen er trykket igen vil den sidste sætning blive udtalt endnu en gang.

Du kan konfigurere **OnScreenKeys** så hvert ord udtales med det samme efter det er skrevet.

Automatisk opstart

Du kan få **OnScreenKeys** til automatisk at starte op med Windows®.

Denne mulighed kan aktiveres eller deaktiveres i konfigurationsvinduet i fanebladet "Ekstra".

FORSKELLE FRA HARDWARETASTATURE

Dette er et overblik over knapper og funktioner der ikke er at finde i det normale hardwaretastatur:



Slet bogstav

Sletter det seneste bogstav



Slet ord

Sletter det sidste ord



Generelle indstillinger

Åbner konfigurationsvinduet



Klik-Pause

Midlertidig frakobling af autoklik

Ved at starte denne lås vil autoklik-funktionen blive sat på pause indtil den er aktiveret igen ved et tryk på samme knap.




Flere knapper

Viser flere knapper (f.eks. matematik-relaterede knapper") og specielle kommandoer



Stort forbogstavstast

Skifter fra store til små bogstaver eller omvendt på det sidst indtastede ord

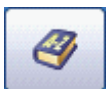

Skift Ordbog/skift sprog

Skifter midlertidigt sprog

De korresponderende knapper, ordbogen og computerstemmen vil sættes i forhold til det nyvalgte sprog. Den ønskede stemme skal vælges i konfigurationsvinduet først (kun tilgængelig i "Deluxe"-versionen).



Midlertidig deaktivering/aktivering af Stemmeoutput



Enter (og udtal sidste sætning)

MUSEBAR (kun tilgængelig i "klik" og "deluxe"-versionerne)

Hvis du har problemer med at klikke med den almindelige computermus, kan du emulere museklik med **OnScreenKeys**.

Brug et øjeblik på at overveje hvilken type klik du har brug for (f.eks. simpelt klik, dobbeltklik, højreklik, træk-og-slip-klik)..

For eksempel skal du, for at åbne en fil på skrivebordet, bruge et dobbeltklik. Vælg det relevante klik og flyt musemarkøren til den position hvor klikket skal udføres. Efter en kort periode vil museklikket automatisk blive udført på den position.



Et tryk på denne knap åbner museknaps-baren:



Overblik over museklikstype:



Venstreklik (simpelt klik)



Dobbeltklik



Højreklik



Træk & Slip



Afslut klikfunktioner & luk museknapsbaren

Musekliksparemetrene (f.eks. bevægelsestolerance, radius, tremortolerance osv.) kan justeres i konfigurationsvinduet.

STEMMEOUTPUT ("Deluxe"-versionen kun)

Stemmeoutput kan aktiveres/deaktiveres ved at klikke på følgende knap:



Afhængig af den nuværende status kan en af følgende ikoner vises:



Stemmeoutput deaktiveret



Stemmeoutput aktiveret



Taleoutput ikke tilgængeligt grundet en fejl



Stemmeoutputfunktionen er ikke tilgængelig i den version du har købt.

Hvis taleoutputfunktionen er aktiveret, vil alle skrevne linjer blive sendt til talefunktionen når du trykker på enter.

Hvis der trykkes på Enter igen, vil den sidste sætning blive oplæst igen.

Du kan konfigurere **OnScreenKeys** så hvert ord udtales med det samme efter det er skrevet.

Computerstemmen som **OnScreenKeys** benytter kan vælges i konfigurationsvinduet.

Hvis du ønsker at kommunikere på flere sprog, kan du vælge en separat stemme til hvert sprog.

FRASER

En frase er et tekstmodul som bruges ofte, f.eks. dit eget navn og adresse, etc.

Op til 10 fraser kan sættes op i **OnScreenKeys**

Sæt fraser op:

Åbn konfigurationsvinduet, og tryk på fanen "Tekstmakroer".

Vælg en frase fra listen over tilgængelige fraser, omdøb den hvis du ønsker, og erstat teksten med en tekst efter dit eget ønske.

Efterfølgende, tryk på "Gem"-knappen som er at finde under frasen der lige er blevet redigeret. Du må nu fortsætte med redigering af en anden frase.

Når du er færdig med redigeringen, klik da på konfigurationsvinduet "Gem"-knap.

Skrive fraser:

Klik på kortboks-knappen.



Dine tilpassede fraser vil nu vise sig i ordknapperne.

Klik på en af knapperne for at få teksten skrevet.

TEKSTMAKROER

Med hjælp fra tekstmakro-funktionen kan uendeligt mange paragraffer skrives.

Et konsekvent navneskema er anbefalet fordi du vil få brug for at inddrage den præ-skrevne tekst senere hen efter deres navngivning.

Opret tekstmakro:

Åbn konfigurationsvinduet og klik på fanebladet "Tekstmakroer".

Klik på knappen "Ny" i området til højre, indtast dernæst et navn og teksten der senere skal skrives.

Klik derefter på knappen "**Ny(t)**".
Du kan nu indtaste nye paragraffer.

Brug tekstmakroer:

Klik på firkantsymbolet (#) på tastaturet.
Hvis firkanttegnet ikke er at finde, klik på Shift-knappen.

Start med at skrive navnet på tekstmakroen indtil den viser sig i en af de 10 ordforudsigelsesknapper.

Klik på den passende ordforudsigelsesknop for at få den gemte tekst skrevet.

Hvis ingen tekstmakroer (tekstmakroer begynder alle med firkant-tegnet (#)) er vist i ordforudsigelsesknappen, så er der stadig bogstaver i bufferen. I dette tilfælde, klik på Enter først, og klik derefter på firkant-tegnet og start fra begyndelsen igen.

OPDATERINGER

Denne hjemmeside tilbyder periodiske nyheder om gratis opdateringer og nye features:

<https://www.onscreenkeys.com>

KRITIK OG FORSLAG

Vi vil blive glade for at høre fra dig, hvis softwaren ikke tilfredsstiller dig fuldt ud eller du blot har nogle forslag til forbedring af **OnScreenKeys**.

Vær venlig at skrive en email til

mail@tomwebersoftware.com

SUPPORT

Din rådgiver/distributør:

Manuel version: 1.2 (fra og med februar 2019)