

ONSCREENKEYS 5

Windows XP[®] / Windows Vista[®] / Windows 7[®] / Windows 8[®] / Windows 10[®]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το έξυπνο πληκτρολόγιο οθόνης με εικονικά χαρακτηριστικά κλικ ποντικιού και παραγωγής λόγου επιτρέπει τη γρήγορη πληκτρολόγηση και χρήση του υπολογιστή, ακόμη και εάν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι του υπολογιστή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου ή εν μέρει.

Το **OnScreenKeys** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληκτρολόγηση σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είτε πρόκειται για λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, λογισμικό email ή περιηγητή στο διαδίκτυο.

Το **OnScreenKeys** χρησιμοποιείται συχνά σε συστήματα με οθόνη αφής ή σε συνδυασμό με οφθαλμικό ιχνηλάτη, ποντίκι κεφαλής και πολλές άλλες εναλλακτικές συσκευές..


Η εισαγωγή παραμέτρων, όπως το μέγεθος του πληκτρολογίου και η ταχύτητα με την οποία μπορείτε να εργαστείτε μπορεί να προσαρμοστεί ελεύθερα.

Οι μακροεντολές κειμένου και οι εξατομικευμένες φράσεις καθιστούν την πληκτρολόγηση πολύ πιο εύκολη.

Το **OnScreenKeys** περιέχει περισσότερες από 40 γλώσσες και επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή γλωσσών, έτσι ώστε ακόμη και ξενόγλωσσα κείμενα να μπορούν να πληκτρολογηθούν και να εκφωνηθούν μέσω της συνθετικής ομιλίας.

Το **OnScreenKeys** χρησιμοποιεί τις εγκαταστημένες φωνές του συστήματος, και επίσης επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη φωνή SAPI..

Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση "Deluxe"

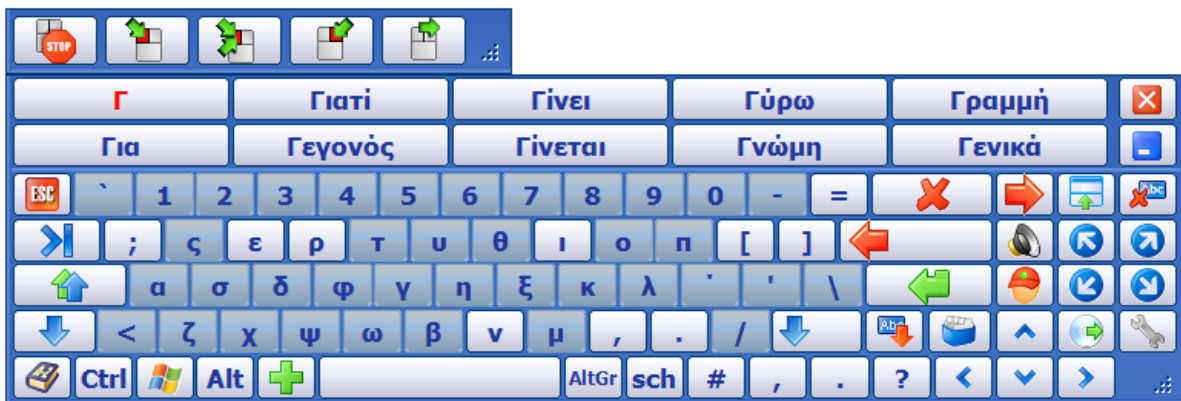

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Αγαπητέ χρήστη!

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το **OnScreenKeys**.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό, αλλά και εύκολο στη χρήση πρόγραμμα για εσάς.

Το **OnScreenKeys** ανανεώνεται συνεχώς. Λήψεις ενημερώσεων μπορούν να γίνουν από τον ιστότοπό μας.

Ελπίζουμε το προϊόν μας να καλύπτει τις προσδοκίες σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ...

... μέσω τηλεφώνου: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

... μέσω email: mail@tomweber-software.com

Σας εύχομαι να διασκεδάσετε δοκιμάζοντας το λογισμικό.

Tom Weber

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Με την πάροδο των 60 ημερών της δοκιμαστικής περιόδου, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του λογισμικού.

Για να ενεργοποιήσετε το λογισμικό, θα χρειαστείτε τον Αριθμό-Κλειδί Προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στην επόμενη σελίδα, καθώς επίσης και τον Αριθμό-Κλειδί Εγκατάστασης που παράγεται ξεχωριστά κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αφού έχει εγκατασταθεί.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να ενεργοποιήσετε το **OnScreenKeys**:

- 1** Εγκαταστήστε το **OnScreenKeys** στον υπολογιστή σας, και κάντε εκκίνηση του λογισμικού.
- 2** Επιλέξτε την επιλογή "**Έχω αγοράσει το λογισμικό και θέλω να το ενεργοποιήσω τώρα.**". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "**Ok**".
- 3**
 - a)** Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με το internet, βάλτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος στο κατάλληλο πλαίσιο κειμένου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "**Ενεργοποίηση μέσω διαδικτύου τώρα**". Μετά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 - b)** Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με το internet, κάντε κλικ στο κουμπί "**Ενεργοποίηση χωρίς διαδικτυακή σύνδεση**", και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ

Ο Αριθμός-Κλειδί Προϊόντος σας (Product Key) είναι:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν το **OnScreenKeys** σας παραδόθηκε σε CD, τοποθετήστε το στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Η εγκατάσταση θα αρχίσει αυτόματα.

Εάν η εγκατάσταση από το CD δεν ξεκινήσει αυτόματα, το **osksetup.exe** στο CD πρέπει να ξεκινήσει χειροκίνητα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το λογισμικό **OnScreenKeys** είναι μια μέθοδος πληκτρολόγησης και επικοινωνίας για όσους δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το συνηθισμένο πληκτρολόγιο ή το ποντίκι του υπολογιστή.

Το λογισμικό πατάει αυτόματα τα πλήκτρα και τα κουμπιά του ποντικιού αντί για το χρήστη. Ο χρήστης χρειάζεται απλώς να μετακινήσει το δείκτη του ποντικιού επάνω στο πλήκτρο που θέλει, το οποίο θα πατηθεί αυτόματα μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραμονής.

Το **OnScreenKeys** προβάλλεται πάντα πάνω από τα άλλα παράθυρα, έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε κείμενα σε οποιοδήποτε άλλο παράθυρο (π.χ. λογισμικό επαγγελματίας κειμένου, περιηγητή στο διαδίκτυο, κτλ).

Στις εκδόσεις "Click" και "Deluxe" το **OnScreenKeys** παρέχει ένα χαρακτηριστικό, με το οποίο τα κλικ του ποντικιού μπορούν να γίνουν ακόμη και εκτός πληκτρολογίου.


Η έκδοση "Deluxe" του **OnScreenKeys** παρέχει τη δυνατότητα ομιλίας μέσω υπολογιστή, με την οποία το πληκτρολογημένο κείμενο μπορεί να εκφωνηθεί μέσω των ηχείων του υπολογιστή. Η ένταξη οποιασδήποτε συνθετικής φωνής που πληρεί τα κριτήρια του SAPI (Speech Application Programming Interface) είναι εύκολη να πραγματοποιηθεί.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Για να γίνει εκκίνηση του λογισμικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο **OnScreenKeys** στην επιφάνεια εργασίας σας ή επιλέξτε το **OnScreenKeys** από τα προγράμματα στο μενού έναρξης.

Το λογισμικό θα ανιχνεύσει αυτόματα τη γλώσσα στην έκδοση των Windows® που έχετε και θα ρυθμίσει τις παραμέτρους του αναλόγως.

Μπορείτε να επιλέξετε δικαφορετική γλώσσα, καθώς επίσης και να επεξεργαστείτε πολλές παραμέτρους στο παράθυρο διαμόρφωσης. Μπορείτε να ανοίξετε το Παράθυρο Διαμόρφωσης κάνοντας κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις που βρίσκεται επάνω στο πληκτρολόγιο οθόνης.

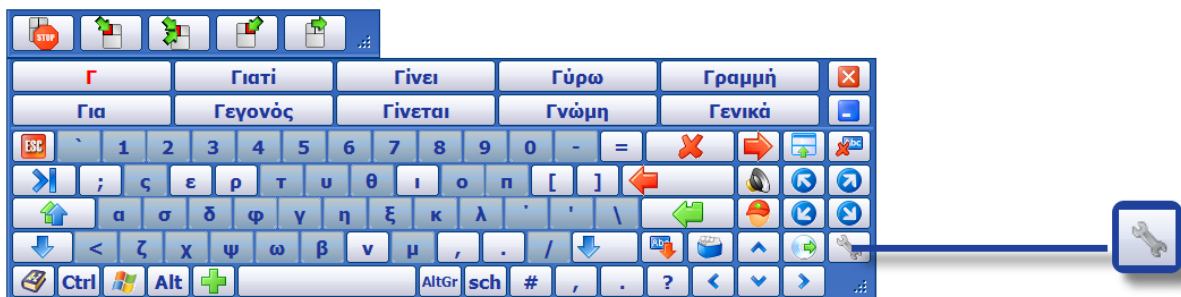

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προκειμένου να πληκτρολογήσετε με το **OnScreenKeys** (ακριβώς όπως όταν χρησιμοποιείτε το κανονικό πληκτρολόγιο), πρέπει να ανοίξετε ένα παράθυρο κειμένου και ο κέρσορας που αναβοσβήνει πρέπει να βρίσκεται επάνω σε αυτό το παράθυρο.

Κατά την έναρξη του προγράμματος, θα ανοίξει αυτόματα ένας επεξεργαστής κειμένου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στο Παράθυρο Διαμόρφωσης ή να επιλέξετε διαφορετικό επεξεργαστή κειμένου.

Για να πατήσετε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο οθόνης, χρειάζεται απλώς να μετακινήσετε το βελάκι επάνω στο πλήκτρο που επιθυμείτε και να το αφήσετε για λίγο σε αυτήν τη θέση. Το πλήκτρο θα πατηθεί αυτόματα όταν εξαντληθεί ο χρόνος παραμονής.

Στο παράθυρο διαμόρφωσης μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία αυτόματου κλικ ή να αλλάξετε το χρόνο παραμονής.

Αυτόματη συμπλήρωση λέξης ή πρόβλεψη λέξης.

Το **OnScreenKeys** παρέχει διπλή υποστήριξη για γρήγορη πληκτρολόγηση:

> Αυτόματη Συμπλήρωση Λέξης: Μόλις πληκτρολογήσετε το πρώτο γράμμα μιας καινούργιας λέξης, στα 10 κουμπιά λέξεων θα εμφανιστούν διάφορες υποδείξεις λέξεων τις οποίες μπορείτε να πληκτρολογήσετε με ένα κλικ.

> Υπόδειξη-Επόμενη-Λέξη: Μόλις ολοκληρώσετε μια λέξη, θα εμφανιστούν οι 10 πιο πιθανές επόμενες λέξεις.

Προσαρμογή στον Τρόπο Γραφής

Το **OnScreenKeys** διαθέτει προεπιλεγμένο εκτενές λεξικό. Επιπλέον, το λογισμικό μαθαίνει καινούργιες λέξεις και φράσεις καθώς εσείς τις πληκτρολογείτε, και προσαρμόζεται στον τρόπο γραφής σας.

Επιπλέον, μπορείτε να εισάγετε προσωπικά έγγραφα και επιστολές, προκειμένου το λογισμικό να προσαρμοστεί γρηγορότερα στον τρόπο γραφής σας.

Φράσεις και Μακροεντολές Κειμένου

Μπορείτε να γράψετε σύντομες φράσεις ή ολόκληρες παραγράφους τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως με το κλικ ενός κουμπιού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω σελίδες.

Ομιλία (διαθέσιμη μόνο στην έκδοση "Deluxe")

Όταν η λειτουργία ομιλίας είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε κάθε πληκτρολογημένη πρόταση με το πάτημα του πλήκτρου Enter. Εάν πατήσετε πάλι το πλήκτρο Enter, θα ακούσετε πάλι την τελευταία πρόταση.

Το **OnScreenKeys** μπορεί να ρυθμιστεί, έτσι ώστε μετά την πληκτρολόγηση μιας λέξης να γίνεται αμέσως η εκφώνησή της.

Αυτόματη Εκκίνηση

Θα γίνεται αυτόματη εκκίνηση του **OnScreenKeys** με την έναρξη των Windows®.

Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στο Παράθυρο Ρυθμίσεων από την καρτέλα "Πρόσθετα".

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση που αναφέρεται σε πλήκτρα και λειτουργίες που δεν υπάρχουν σε ένα κανονικό πληκτρολόγιο υπολογιστή:



Πλήκτρο διαγραφής

Σβήνει το τελευταίο πλήκτρο



Διαγραφή λέξης

Διαγράφει τη προηγούμενη λέξη



Βασικές ρυθμίσεις

Ανοίγει το παράθυρο διαμόρφωσης



Κλικ-Παύση

Απενεργοποιεί προσωρινά το Αυτόματο -Κλικ

Πατώντας το κουμπί με την κλειδαριά, η λειτουργία Αυτόματο-Κλικ θα διακοπεί μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά με το πάτημα του ίδιου κουμπιού.



Επιπλέον Πλήκτρα

Δείχνει επιπλέον πλήκτρα (π.χ. μαθηματικά πλήκτρα) και ειδικές εντολές



Πλήκτρο Word Shift (για αλλαγή πεζών-κεφαλαίων)


Αλλάζει τα γράμματα της τελευταίας πληκτρολογημένης λέξης από πεζά σε κεφαλαία και το αντίστροφο



Αλλαγή Λεξικού/Αλλαγή Γλώσσας

Αλλάζει προσωρινά τη γλώσσα

Τα αντίστοιχα κουμπιά, το λεξικό και η συνθετική φωνή θα ρυθμιστούν ανάλογα με τη γλώσσα που μόλις επιλέξατε. Θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη φωνή της αρεσκείας σας στο παράθυρο διαμόρφωσης (διατίθεται μόνο στην έκδοση "Deluxe").

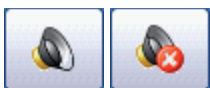

Προσωρινή Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Παραγωγής Λόγου



Εισαγωγή (και εκφώνηση της τελευταίας πρότασης)

ΜΠΑΡΑ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (διαθέσιμη μόνο στις εκδόσεις "Click" και "DeLuxe")

Εάν δεν μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά ενός κανονικού ποντικιού, μπορείτε να μιμηθείτε τα κλικ του ποντικιού με το **OnScreenKeys**.

Σκεφτείτε τι είδους κλικ θα χρειαστεί να κάνετε (π.χ. απλό κλικ, διπλό κλικ, δεξί κλικ ή μεταφορά και απόθεση Drag&Drop)..

Για παράδειγμα, για να ανοίξετε ένα φάκελο επάνω στην επιφάνεια εργασίας, θα χρειαστείτε διπλό κλικ. Επιλέξτε το κατάλληλο κλικ (βλέπε παρακάτω), και μετακινήστε το βελάκι στο σημείο που πρέπει να κάνετε κλικ. Μετά από λίγο, το κλικ θα γίνει αυτόματα στο σημείο αυτό.



Ενα κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει τη Γραμμή Κουμπιού του Ποντικιού:



Περίληψη ειδών κλικ του ποντικιού:



Αριστερό κλικ (απλό κλικ)



Διπλό κλικ



Δεξί κλικ



Μεταφορά & Απόθεση



Ακύρωση των λειτουργιών τού κλικ & κλείσιμο της γραμμής κουμπιού τού ποντικιού

Οι παράμετροι για το κλικ του ποντικιού (π.χ. ανοχή κίνησης, ακτίνα, ανοχή τρεμουλιάσματος κ.τ.λ.) μπορούν να ρυθμιστούν στο παράθυρο διαμόρφωσης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ("Deluxe" έκδοση μόνο)

Η παραγωγή λόγου μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί με ένα κλικ στο ακόλουθο κουμπί:



Ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση, θα εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω εικονίδια:



Απενεργοποίηση παραγωγής λόγου



Ενεργοποίηση παραγωγής λόγου



Η παραγωγή λόγου δεν είναι διαθέσιμη λόγω σφάλματος



Η φωνητική αναπαραγωγή δεν είναι διαθέσιμη στην έκδοση που αγοράσατε.

Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία παραγωγής λόγου, κάθε πληκτρολογημένη πρόταση θα αποστέλλεται στη μηχανή λόγου κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο enter.

Εάν πατήσετε πάλι το κουμπί "Επιστροφή", θα ακούσετε πάλι την τελευταία πρόταση.

Το **OnScreenKeys** μπορεί να ρυθμιστεί, έτσι ώστε μετά την πληκτρολόγηση μιας λέξης να γίνεται αμέσως η εκφώνησή της.

Μπορείτε να επιλέξετε τη συνθετική φωνή που θα χρησιμοποιεί το **OnScreenKeys** από το παράθυρο διαμόρφωσης.

Εάν επικοινωνείτε σε πολλές γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική φωνή για κάθε γλώσσα.

ΦΡΑΣΕΙΣ

Φράση ονομάζουμε ένα μεμονωμένο κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί συχνά, π.χ. το όνομα, ο ταχυδρομικός σας κώδικας, κ.τ.λ.

Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 10 φράσεις στο **OnScreenKeys**

Εισαγωγή φράσεων:


Ανοίξετε το Παράθυρο Διαμόρφωσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην ταμπέλα "Μακροεντολές κειμένου".

Επιλέξτε μια φράση από τη λίστα των διαθέσιμων φράσεων, μετονομάστε την αν επιθυμείτε, και αντικαταστήστε το κείμενο με ένα κείμενο της επιλογής σας.

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "**Αποθήκευση**" που βρίσκεται κάτω από τη φράση που μόλις επεξεργαστήκατε.

Μπορείτε μετά να προχωρήσετε στην επεξεργασία και άλλων φράσεων.

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των φράσεων, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" στο παράθυρο διαμόρφωσης.

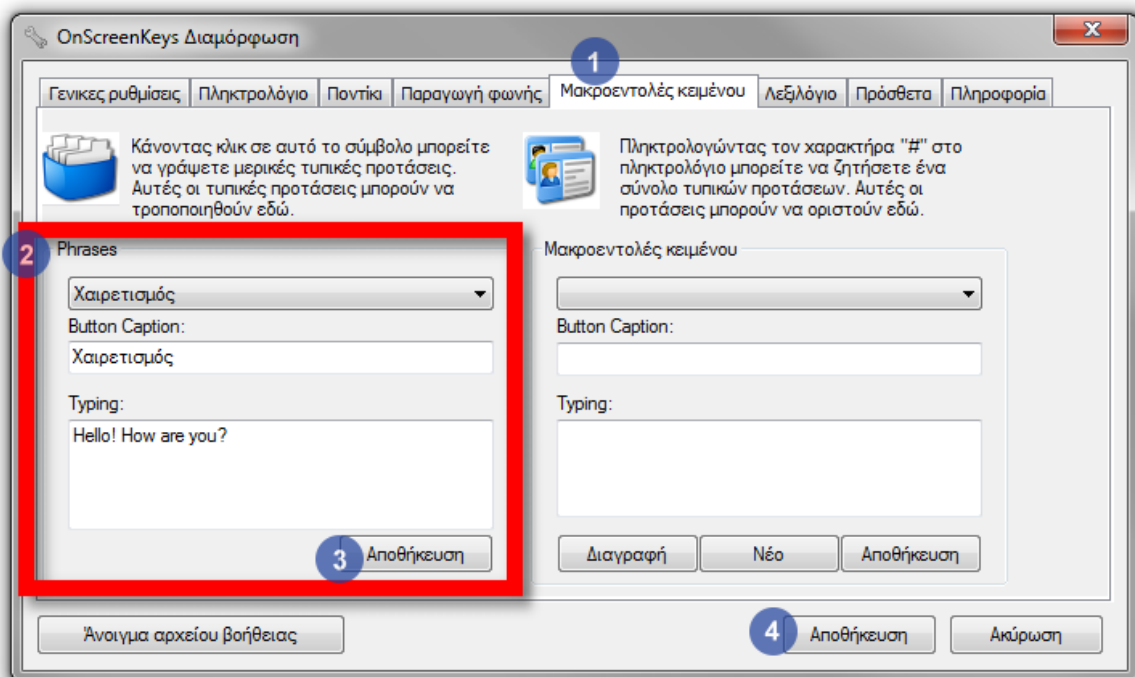

Πληκτρολόγηση φράσεων:

Κάντε κλικ στο κουμπί τού κουτιού με τις κάρτες.



Οι προσαρμοσμένες φράσεις σας θα εμφανιστούν τώρα στα κελιά λέξεων.

Πατήστε ένα από τα κουμπιά, προκειμένου να εμφανιστεί το αποθηκευμένο κείμενο.

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μέσω της λειτουργίας των μακροεντολών κειμένου, μπορείτε να γράψετε απεριόριστο αριθμό παραγράφων.


Συνιστάται η δημιουργία ενός συνεπούς σχεδιασμού ονοματοδοσίας, διότι εκ των υστέρων θα χρειαστεί να ανασύρετε κείμενα μέσω της ονομασίας που τους έχετε δώσει.

Δημιουργία μακροεντολών κειμένου:

Ανοίξτε το Παράθυρο Διαμόρφωσης και επιλέξτε την καρτέλα "Μακροεντολές Κειμένου".

Κάντε κλικ στο κουμπί "Νέο" που βρίσκεται πάνω δεξιά, εισάγετε ένα όνομα και το κείμενο που θέλετε να γράψετε αργότερα.

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Νέο".
Μπορείτε τώρα να εισάγετε νέες παραγράφους.

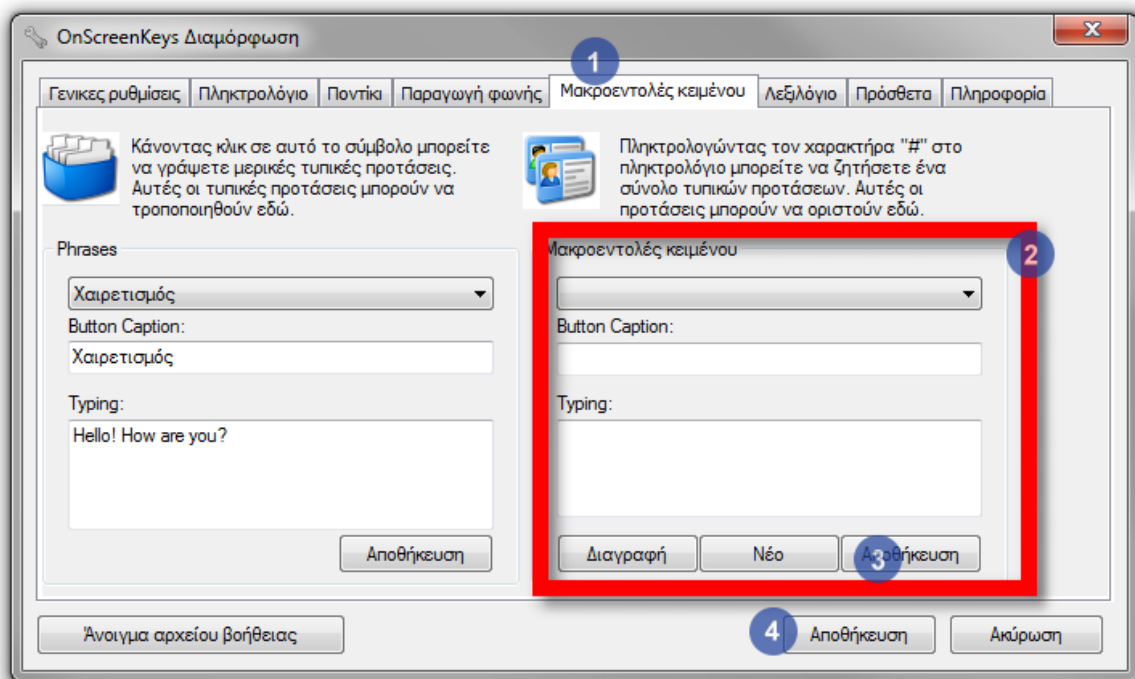

Ανάκληση Μακροεντολών Κειμένου:

Κάντε κλικ στη Δίεση (#) στο πληκτρολόγιο.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη Δίεση, κάντε κλικ στο πλήκτρο Shift.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα μιας μακροεντολής κειμένου μέχρι να εμφανιστεί σε ένα από τα 10 κουμπιά πρόβλεψης λέξεων.

Κάντε κλικ στο κατάλληλο κουμπί πρόβλεψης λέξης για να εμφανιστεί το αποθηκευμένο κείμενο.

Εάν δεν εμφανιστεί κάποια μακροεντολή κειμένου στο κουμπί πρόβλεψης λέξης (όλες οι μακροεντολές κειμένου ξεκινούν με το σημάδι της Δίεσης (#)), υπάρχουν γράμματα και στην ενδιάμεση μνήμη. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε πρώτα κλικ στο κουμπί Enter, μετά στη Δίεση, και αρχίστε πάλι από την αρχή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υποστήριξη παρέχει ο εμπορικός σας αντιπρόσωπος ή απευθείας οι κατασκευαστές:

tom weber software
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Γερμανία

Τηλ.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει περιοδικά νέα σχετικά με δωρεάν αναβαθμίσεις και καινούργια χαρακτηριστικά:

<http://www.onscreenkeys.com>

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Θα χαιρόμασταν εάν μας αναφέρατε ό,τι δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας στο λογισμικό μας, ή εάν έχετε υποδείξεις για τη βελτίωση του **OnScreenKeys**.

Παρακαλούμε, στείλτε email στη διεύθυνση

mail@onscreenkeys.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο σύμβουλος/εμπορικός σας αντιπρόσωπος: