

LÝSING AV FORRITINUM

Hetta smarta skíggjaknappaborðið við virtuellum músaklökkum og talu ger tað gjørligt hjá tær at brúka telduna, hóast tú ikki fær brúkt knappaborðið ella músina.

OnScreenKeys kann brúkast til at skriva í einumhvørjum forriti, um tað er til tekstviðgerð ella rokniark, teldupost ella alnet.

OnScreenKeys verður ofta brúkt til nertiskíggjar ella saman við eygnasporara, høvuðmúsum og nógvum øðrum tólum..

Parametrar fyri innlesing, so sum støddin á knappaborðinum og arbeiðsferð, kunnu stillast sum tær lystir. Tekstmakroir og sjálvvaldar orðingar gera skrivning nógv lættari.

TAKK FYRI

Góði brúkari!

Takk fyri at tú valdi **OnScreenKeys**.

Vit hava roynt okkara besta, fyri at gera eitt gagnligt forrit til tín, sum eisini er lætt at brúka.

OnScreenKeys verður støðugt betrað. Uppdateringar kunnu heintast á okkara heimasíðu.

Vit vóna at forritið svarar til tínar vónir.

Eg ynski tær nógvar góðar løtur, tá tú roynir forritið.

Tom Weber

AKTIVERING AV FORRITI

Tá royndartíðin uppá 60 dagar er lokin, er neyðugt at aktivera forritið.

Fyri at aktivera forritið, hevur tú brúk fyri produkttalinum, sum stendur á næstu síðu, og innleggingartalinum, sum verður skapt tá forritið verður lagt inn. Hetta merkir, at forritið kann bara aktiverast eftir at tað er lagt inn.

1

2

3

a)

b)

PRODUKTTALIÐ

Vørunummarið er:

INNLEGGING

Um tú fekst **OnScreenKeys** á fløgu, set so fløguna í fløgudrevið. Installatióin startar av sær sjálvari.

Um innlegging av fløgu ikki byrjar av sær sjálvari, eigur á fløguni at vera byrjað við hond.

INNGANGUR

Forritið **OnScreenKeys** hjálpir fólki, sum ikki eru før fyri at brúka tað vanliga knappaborðið ella ta vanligu músina, at skriva og at samskifta.

Forritið ger klikk á mús ella knappaborð sjálvvirkin fyri brúkaran.

OnScreenKeys verður altíð víst framman fyri aðrar gluggar, soleiðis at tú kanst senda tekst til eitthvønn annan glugga (t.d. eitt forrit til tekstviðgerð, alnetskaga o.s.fr.).

Í "klikkútgávuni" og serútgávuni av **OnScreenKeys** kanst tú trýsta við músini í øðrum gluggum enn tí, sum knappaborðið er í.

Serútgávan av **OnScreenKeys** hevur eina teldurødd, sum kann lesa skrivaðan tekst upp. Teldurøddir, sum fylgja SAPI-normalinum, kunnu lættliga brúkast saman við forritinum.

TÁ TÚ TENDRAR FYRI FYRSTU FERÐ

Trýst á ikonið "**OnScreenKeys**" á skriviborðinum, fyri at tendra forritið, ella finn tað undir "**OnScreenKeys**" í startvalmyndini.

Forritið finnur sjálvst málið á tínari útgávu av Windows®, og setur seg upp hareftir.

Tú kanst velja eitt annað mál og stilla fleiri ymskar parametrar í uppsetingarglugganum. Tú kanst lata uppsetingargluggan upp við at trýsta á uppsetingarknappin á skíggjaknappaborðinum.

GRUNDLEGGJANDI YVIRLIT

Fyri at skriva við **OnScreenKeys** (eins og tá tú skrivar við einum vanligum knappaborðið), má ein teksluggi vera opin, og tann blinkandi vísir má síggjast í tí glugganum.

Ein tekstritil letur upp av sær sjálvum, tá forritið verður tendrað.

Tú kanst sláa hesa funktiónina frá í uppsetingarglugganum, ella velja ein annan tekstritil.

Fyri at trýsta á skíggjaknappaborðið, heldur tú bara músini á tí valda knappinum eina líftla løtu. Knappurin verður klicktur tá ein ásett bíðitíð er farin.

Í uppsetingarglugganum kanst tú sláa autoklikkfunktiónina frá, ella broyta bíðitíðina.

Fullfígjan og forsøgn av orðum

OnScreenKeys hevur tveir mátar at skriva skjótt uppá:

> Fullfígjan av orðum: Beinanvegin tú skrivar tann fyrsta stavin í einum orði, verða uppskot um orð víst á teimum 10 orðknappunum, sum tú kanst trýsta á, fyri at skrivað orðið.

> Uppskot um tað næsta orðið: Beinanvegin tú hevur skrivað eitt orð, verða tey 10 sannlíkastu næstu orðini víst.

Tillaging til skringarlag

OnScreenKeys hevur eina umfatandi orðabók frá byrjan. Haraftur lærir forritið nýggj orð og setningar meðan tú skrivar, og lagar seg til tín skrivstíl.

Harafturat kunnu persónlig skjøl og brøv lesast inn, so at forritið enn skjótari kann laga seg títt skringarlag.

Orðingar og tekstmakroir

Við klicki á ein knapp kanst tú skriva stuttar orðingar ella heil reglubrot, sum tú hevur goymt frammanundan.

Meira um hetta er at finna á teimum næstu síðunum.

Tala (bara tøk í serútgávuni)

Tá tala er sligin til, verða allir skrivaðir setningar sagdir, tá tú trýstir á Enter. Trýstir tú aftur á Enter, verður setningur sagdur umaftur.



Strika bræv



Strika orð


Strika tað síðsta orðið



Almennar ásetingar



Skiftiknappur

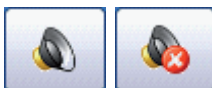

MÚSABJÁLKI (bara tækur í klick- og serútgávuni)



Eitt trýst á henda knappin open bjálkan við músaknappum:



Yvirlit yvir sløg av músaklikkum:



Vinstraklikk (eitt klick)



Dupultklick



Høgraklikk



Toga & slepp



Lat klickfunkur og bjálkan við músaknappum aftur

Uppsetingarnar av músaklikkinum (t.d. loyvt frávik í rørlu, radius, loyvt frávik í ristingum o.s.fr.) kunnu broytast í uppsetingarglugganum.



Eingin rødd er tøk í hesari útgávuni, sum tú hevur keypt.

Um funkan til upplesing er sligin til, verður tað tú skrivar sent til talumaskinuna tá tú trýstir á enter.

Í mesta lagi 10 orðingar kunnu setast upp í **OnScreenKeys**

Seta orðingar upp:

Lat uppsetingargluggan upp og trýst á skiljiblaðið "Tekstmakroir".

Vel eina orðing frá listanum yvir orðingar, gev henni eitt nýtt navn, um tú vilt, og skift tekstin út við tín egna.

Trýst síðan á knappin "**Goym**", sum er beint undir orðingini, ið júst er broytt.
Tú kanst síðan halda fram, og broyta eina aðra orðing.

Trýst á knappin "Goym" í uppsetingarglugganum, tá tú ert liðugur at broyta orðingar.

Skriva orðingar:



Trýst á knappin við pappírseskjuni.

Tínar egnu orðingar fara nú at standa á orðaknappunum.

Trýst á ein av knappunum, fyri at skriva tekstin, sum hoyrir til.

TEKSTMAKROIR

Við tekstmakroum kanst tú skriva so nógv reglubrot, tær lystir.

Ein regluføst navngáva verður viðmælt, tí tú skalt brúka nøvnini til at fáa tann skrivaða tekstin framaftur.

Gera tekstmakroir:

Lat uppsetingargluggan upp og trýst á skiljiblaðið "Tekstmakroir".

Trýst á knappin "Nýtt" í høgru síðu, og skriva eitt navn og tekstin, sum skal skrivast seinni.

Tú kanst nú skriva nýggj brot av teksti.

Kalla tekstmakroir:

Trýst á hækkarmerki (#) á knappaborðinum.

Sæst hækkarmerki ikki, trýst á skiftiknappin.

Skriva navnið á einari tekstmakro, til hon kemur fram á ein av teimum 10 knappunum til orðforsagnir.

Fyri at skriva tann goymda tekstin, trýst so á tann rætta knappin til orðforsøgn.

Verður eingin tekstmakro (tekstmakroir byrja allar við einum hækkarartekni (#)) víst á knappinum til orðforsøgn, eru stavir enn í buffaranum. Um so er, trýst fyrst á Enter knappin, síðan hækkararteknið, og byrja umaftur.

DAGFØRINGAR

Henda heimasíðan kemur javnan við tíðindum um ókeypis dagfóringar og nýggjar hentleikar:

<https://www.onscreenkeys.com>

ATFINNINGAR OG UPPSKOT

Tað hevði frøtt okkum, kundi sagt okkum um okkurt er, sum ikki heilt nøktar tín tørv, ella um tú hevur uppskot til betran av **OnScreenKeys**.

Gerið mær tann beina at skriva ein teldupost til

mail@tomwebersoftware.com

HJÁLP

Tín ráðgevi/veitari: