

OPIS IZDELKA

Ta pametni tipkovnico na zaslonu z navideznimi miške kliknite funkcij in govorni izhod omogoča hitro tipkanje in delo z računalnikom, čeprav ne more samo na tistih delih, se uporablja tipkovnica strojno ali računalniško miško ali.

OnScreenKeys se lahko uporablja za vnašanje v katero koli aplikacijo, naj gre za program za obdelavo besedila, program za preglednice, programsko opremo za e-pošto ali spletni brskalnik.

OnScreenKeys se pogosto uporablja v sistemih na dotik ali v kombinaciji s sledilcem za oči, glavami za glavo in številnimi drugimi nadomestnimi vhodnimi napravami..

Uvozna parametri, kot so velikosti tipkovnice in delovne hitrosti se lahko poljubno prilagajamo. Besedilo makre in prilagojene fraze make tipkanje veliko lažje.

OnScreenKeys vsebuje več kot 40 jezikov in omogoča hitro spreminjanje jezika, tako da lahko tudi besedila tujih jezikov hitro vnašate in jih izgovorijo glasovi računalnika.

OnScreenKeys uporablja nameščene sistemske glasove in omogoča tudi povezovanje z drugimi glasovi SAPI. Na voljo samo v različici "Deluxe"

HVALA

Spoštovani uporabnik!

Najlepša hvala za izbiro **OnScreenKeys**.

Poskušali smo naše najboljše za vzpostavitev učinkovitega in še vedno preprost za uporabo programa za vas.

OnScreenKeys se stalno izboljšuje. Nagradnje lahko prenesete z naše spletne strani.

Upamo, da naš izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

Želim vam veliko zabave na težaven programsko opremo.

Tom Weber

Aktiviranje izdelka

Po poskusnem obdobju 60 dni aktiviranje programske opreme ni potrebno.

Za aktivacijo boste potrebovali ProductKey, ki ga najdete na naslednji strani, kot tudi InstallationKey ki bodo ustvarjeni posebej na inštalacijski programsko opremo. To pomeni, da lahko izdelek aktivira šele potem, ko je nameščena.

Če želite aktivirati **OnScreenKeys**, naredite naslednje:

- 1** V računalnik namestite **OnScreenKeys** in zaženite programsko opremo.
- 2** Izberite možnost »**Kupil sem program in bi ga rad aktiviral.**«. Nato kliknite gumb "**V redu**".
 - a)** Če je vaš računalnik priključen na internet, v ustrezni nabiralnik besedila vnesite izdelek ProductKey.
 - b)** Če je vaš računalnik priključen na internet, kliknite gumb "**Vključite brez internetne povezave**" in sledite navodilom na zaslonu.

VAŠ PRODUCTKEY

Vaš ProductKey je:

MONTAŽA

Če ste program **OnScreenKeys** dobili na CD-ju, ga prosim vstavite v vašo CD enoto. Namestitev se bo začela samodejno.

Če se namestitev z CD-ja ne prične samodejno, ročno zaženite **osk_setup_dvd.exe** na CD-ju.

UVOD

Programska oprema **OnScreenKeys** je tipkarska in komunikacijska pomoč za ljudi, ki ne morejo uporabljati skupne strojne tipkovnice ali računalniške miške.

Programska oprema samodejno ne klikanje tipk in gumbov miške za uporabnika. Uporabnik mora le, da se premaknete kazalec miške do želene tipke, ki pa se sproži samodejno po določenem času mirovanja.

OnScreenKeys se vedno prikaže poleg drugih oken, tako da lahko besedilo pošljete v katero koli drugo okno (npr. Program za obdelavo besedila, spletni brskalnik itd.).

V "Kliku" in v različici "Deluxe" **OnScreenKeys** ponuja funkcijo miške, s katero se lahko kliki z miško izvedejo tudi zunaj tipkovnice.

Različica »Deluxe« **OnScreenKeys** omogoča računalniško govorno govorno možnost, s pomočjo katere lahko zvočniki v računalniku predvajajo vneseno besedilo. Integracija vseh računalniških glasov, ki so v skladu s standardom SAPI je zlahka mogoče.

PRVI START

Če želite zagnati programsko opremo, kliknite ikono »**OnScreenKeys**« na namizju ali v pogovornem meniju povabite iz skupine programov »**OnScreenKeys**«.

Programska oprema bo samodejno zazna jezik svojo različico Windows® in se ustrezno nastavi.

Izberete lahko drug jezik, kot tudi urejanje toliko parametrov v oknu z nastavitvami. Morda boste odprli okno za konfiguracijo s klikom na gumb Nastavitve na tipkovnici na zaslonu.

OSNOVE PREGLED

Če želite vnesti z **OnScreenKeys** (tako kot pri tipkanju z običajno računalniško tipkovnico), mora biti odprto besedilno okno in v tem oknu mora biti viden utripajoč kazalec.

Ob zagonu programa, bo urejevalnik besedila se odpre samodejno.

Morda boste deaktivirate to funkcijo v Configuration okno ali izberite drug urejevalnik besedila.

Sprožiti tipke na tipkovnici na zaslonu, morate le, da se premaknete miškin kazalec zelene tipke in jo tam pustite za nekaj časa. Ključna bo samodejno kliknil po določenem času mirovanja.

V oknu za konfiguracijo lahko deaktivirate to funkcijo auto-klik ali spremenite zadrževalni čas.

Beseda auto-zaključek in beseda napoved

OnScreenKeys zagotavlja dvojno hitrostno podporo:

> Beseda Auto-Zaključek: Takoj, ko boste vnesli prvo črko nove besede, besedne predloge bo prikazano v besedo gumbi 10, ki lahko vpisujete s klikom.

> Naslednja-Word Nasvet: Takoj, ko ste končali eno besedo, se prikažejo 10 najverjetnejša naslednjih besed.

Pisanje Style Prilagoditev

OnScreenKeys že v osnovi ponuja bogat in obširen slovar. Program se nauči novih besed ter stavkov, ki jih vnašate in se prilagodi vašemu stilu pisanja.

Poleg tega lahko osebni dokumenti in pisma uvoziti, da bi programsko opremo prilagodili vaše pisanje stilov še hitreje.

Fraze in Besedilo Makri

Lahko napišete kratke fraze ali cele odstavke, ki ste jih shranili, preden ga s klikom na gumb.

Več informacij o tej temi najdete na nadaljnjih straneh.

Govor (na voljo samo v različici "Deluxe")

Na Activated govorni izhod bo vsak vnesli stavek govori na pritiskom na tipko Enter. Če tipko Enter, nato spet pritisnili, bo zadnji stavek govori še enkrat.

Program **OnScreenKeys** lahko konfigurirate tako, da se vsaka beseda takoj po njem vnese.

Samodejni Zagon

Morda ste **OnScreenKeys** samodejno zagnali operacijski sistem Windows®.

To možnost lahko aktivirate ali deaktivirate v oknu z nastavitvami v zavihku »Dodatki«.

RAZLIKE s strojno opremo KEYBOARD

To je pregled o tipk in funkcij, ki niso na voljo na normalno strojne računalniške tipkovnice:



Izbriši črko

Izbriše zadnjo tipko



Zbriši besedo

Izbriše zadnjo besedo



Splošne nastavitve

Odpira okno za konfiguracijo



Kliknite-zaustavi

Začasno onemogoči Auto-Click

Z sproži zaklepanje, bo samodejno Kliknite funkcijo zaustavljena, dokler je se ponovno aktivira s klikom na isti gumb.



Razširjena Keys

Pokaže dodatne tipke (npr. G. Matematične ključje) in posebnih ukazov



Shift gumb za besede


Spremembe primer lanskega tipkal Word



Spremeni slovar / Spremeni jezik

Začasno spremeni jezik

Ustrezne tipke, slovar in glasovni računalnik bodo nastavljeni glede na novo izbrani jezik.

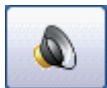

Začasni onemogoči / omogočen govorni izpis



Enter (in govoriyo, zadnji stavek)

MOUSE BAR (na voljo samo v različici "Kliknite" in "Deluxe")

Če imate težave s pritiskom navzdol gumbi običajne računalniške miške, lahko posnemate klike z miško z **OnScreenKeys**.

Vzemite si trenutek za razmislek o tem, katere klik boste morali storiti (e. G. Preprost klik, dvojni klik, desni klik ali povleci in spusti klik)..

Na primer, da bi se odprla datoteka na namizju, boste morali narediti dvojni klik. Izberite ustrezno miškin klik (glej spodaj), in premaknite kazalec miške na mesto, kjer bi moral biti podpisan klik. Čez nekaj časa se bo klik miške samodejno treba narediti na tem mestu.



S klikom na ta gumb se odpre vrstica z Mouse Button:



Mouse pregled tipa klik:



Levi klik (preprostim klikom)



Dvojni klik



Desni klik



Povleci spusti



Nehal klika funkcije & tesno gumb miške bar

Miške kliknite parametri (e. g. tolerance gibanje, radij, tolerance tremor, itd) lahko nastavite v oknu za nastavitve.

SPEECH OUTPUT (samo različica "Deluxe")

Izhod govora se lahko aktivira / deaktivira s klikom na naslednji gumb:



Odvisno od trenutnega stanja eno izmed naslednjih ikon bodo prikazani:



Govorni izhod deaktivira



Govor aktivira izhod



Govorni izhod ni na voljo zaradi napake



Glas izhod ni na voljo v različici, ki ste ga kupili.

Če je funkcija izgovoraje besedil omogočena, bo vnešeno besedilo izgovorjeno ob vsakem pritisku tipke enter.

Če je ključ Return ponovno pritisnete, se zadnji stavek pa spet govori.

Program **OnScreenKeys** lahko konfigurirate tako, da se vsaka beseda takoj po njem vnese.

Glasovni računalnik, ki ga bo uporabil **OnScreenKeys**, lahko izberete v oknu za konfiguracijo.

Če sporazumevanje v več jezikih, lahko izberete drug glas za vsak jezik.

Stavki

Fraza je tekst modul, ki se pogosto uporabljajo, npr. g. svoje ime in poštni naslov, itd

V **OnScreenKeys** lahko nastavite do 10 besed

Nastavitev fraze:

Odprite okno za konfiguracijo in kliknite zavihek "Makroi besedila".

Izberite stavek iz seznama razpoložljivih stavkov, preimenuvati po želji in ga zamenjati z besedilom po vaši izbiri.

Nato kliknite gumb »**Uložit**«, ki se nahaja pod pravkar urejano frazo.
Nato lahko nadaljujete z urejanjem en stavek.

Ko končate urejanje besednih zvez, kliknite gumb "Shrani" v nastavitvah oken.

Tipkanje fraze:



Kliknite gumb kartice polje.

Vaši meri stavki se prikaže na gumbe besedo.

Kliknite enega od gumbov, da bi imeli njegovo osnovno besedilo napisano.

BESEDILO makri

S pomočjo besedila makro funkcijo lahko zapišemo neskončno število točk.

Usklajena shema poimenovanja je priporočljivo, ker boste morali sklicevati na že napisano besedilo, kasneje s svojimi namings.

Ustvarjanje besedila makre:

Odprite okno za konfiguracijo in kliknite zavihek "Makroi besedila".

Na območju na desni strani kliknite gumb »Novo« in vnesite ime in besedilo, ki naj bo kasneje napisano.

Nato kliknite gumb "**Nový**".

Zdaj lahko vpišete nove odstavke.

Klicanje Besedilo makre:

Kliknite Sharp Prijava (#) na tipkovnici.

Če Sharp znak ni viden, kliknite tipko Shift.

Začnite vnašati ime v besedilno makro, dokler se ne pokaže v eni od gumbov za napovedovanje 10 besedil.

Klikni na ustrezen gumb beseda predvidevanja, da ima shranjeno besedilo izpisano.

Če ni besedilo makre (besedilo makre vse začne s Sharp značaja (#)) so prikazani na gumb beseda napovedovanja, še vedno obstajajo črke v pufru. V tem primeru kliknite tipko Enter, nato pa kliknite Sharp znak, in začeti od začetka znova.

POSODOBITVE

Ta spletna stran ponuja redne novice o brezplačnih posodobitve in nove funkcije:

<https://www.onscreenkeys.com>

Kritike in predloge

Z veseljem vam bomo povedali, če nekaj o naši programski opremi ne ustreza vašim potrebam ali če imate kakšne predloge o tem, kako izboljšati **OnScreenKeys**.

Prosimo, napišite e-mail:

mail@tomwebersoftware.com

PODPORA

Vaš svetovalec / distributer:

Ročna različica: 1.2 (od februar <LETO>)