

ОПИС ПРОИЗВОДА

Овај паметни тастатуру на екрану са виртуелним кликом миша карактеристика и звучну омогућава брзо куцање и рад са рачунаром чак и ако не могу или само у деловима може користити тастатуру хардвер или рачунар миш.

<ПРОДУЦТНАМЕ> се може користити за унос у било коју апликацију, било да је то софтвер за обраду текста, програм за табеларне прорачуне, еМаил софтвер или интернет претраживач.

<ПРОДУЦТНАМЕ> се често користи на системима са екраном осетљивим на додир или у комбинацији са трагачем за очи, главним мишевима и многим другим алатима за унос..

Параметри увоз, као што су величина тастатуре је и брзина рада може слободно подешавати. Текст макрои и персонализоване фразе марки куцање много лакше.

<ПРОДУЦТНАМЕ> садржи више од 40 језика и омогућава брзо мењање језика, тако да чак и текстови на енглеском језику могу брзо да се откуцају и да их говоре гласом рачунара.

<ПРОДУЦТНАМЕ> користи инсталиране гласове система и такође омогућава повезивање са било којим другим САПИ гласом.

Доступно само у верзији "Делуке"

ХВАЛА ВАМ

Драги корисника!

Пуно вам хвала што сте изабрали <ПРОДУЦТНАМЕ>.

Покушали смо дамо све од себе да створи ефикасну и увек лако за руковање програм за вас.

<ПРОДУЦТНАМЕ> се стално побољшава. Исправке се могу преузети са нашег сајта.

Надамо се да наш производ задовољава Ваша очекивања.

Желим вам пуно забаве на покушавајући софтвера.

Tom Weber

Продуцт Активатион

Након 60 дана пробног периода активирање софтвера је потребно.

Да бисте активирали софтвер, потребан вам је ПродуцтКеи који се могу наћи на следећој страници, као и ИнсталлатионКеи који ће се појединачно произведене у инсталлатинг софтвера. То значи да производ може да се активира само када је инсталиран.

Урадите следеће како бисте активирали <ПРОДУЦТНАМЕ>:

1

Инсталирајте <ПРОДУЦТНАМЕ> на рачунару и покрените софтвер.

2

Изаберите опцију "<ОПТИОННАМЕ>".
Затим кликните на дугме "<БУТТОННАМЕ>".

3

a) Ако је ваш рачунар повезан на Интернет, унесите свој ПродуцтКеи у одговарајући текстуални оквир.

b) Ако је ваш рачунар повезан на Интернет, кликните на дугме "<БУТТОННАМЕ>" и пратите упутства на екрану.

ИОУР ПРОДУЦТКЕИ

Ваш ПродуцтКеи је:

Инсталација

Ако је <ПРОДУЦТНАМЕ> испоручен на ЦД-у, ставите га на ЦД-РОМ јединицу рачунара.
Инсталација ће почети аутоматски.

Ако се инсталација са ЦД-а не покрене аутоматски, <ПРОДУЦТФИЛЕНАМЕЕКСЕ> на ЦД-у би
требало покренути ручно.

УВОД

Софтвер <ПРОДУЦТНАМЕ> је типкарска и комуникацијска помоћ за људе који нису у могућности да користе заједничку хардверску тастатуру или рачунарски миш.

Софтвер ради на клик тастера и тастера миша аутоматски за корисника. Корисник само треба да померите показивач до жељеног тастера који ће потом бити изазвао аутоматски након одређеног времена задржавања.

<ПРОДУЦТНАМЕ> се увијек приказује на врху других прозора, тако да можете послати текст било ком другом прозору (нпр. Софтвер за обраду текста, интернет претраживач итд.).

У "Клику" иу верзији "Делуке" <ПРОДУЦТНАМЕ> пружа функцију миша, помоћу којег се кликом миша могу извршити и изван тастатуре.

"Делуке" верзија <ПРОДУЦТНАМЕ> пружа опцију говорног говора помоћу којег тастери могу да излазе звучници рачунара. Интеграција било рачунарских гласове који су у складу са САПИ стандарда је лако могуће.

Фирст старт

Да бисте покренули софтвер, кликните на икону "<ПРОДУЦТНАМЕ>" на радној површини или покрените га из групе програма "<ПРОДУЦТНАМЕ>" у почетном менију.

Програм ће аутоматски детектовати језик вашег Виндовс® верзије и сходно томе подешава се.

Можете изабрати неки други језик, као и уређивање много параметара у прозору за конфигурацију. Можете отворити прозор за конфигурацију тако што ћете кликнути на дугме Сеттингс на тастатури на екрану.

ОСНОВИ ПРЕГЛЕД

Да бисте откуцали помоћу <ПРОДУЦТНАМЕ> (слично као код писања са нормалном тастатури рачунара) текстовни прозор мора бити отворен, а трепћући курсор мора бити видљив у том прозору.

У стартовању програма, текст едитор ће се отворити аутоматски.

Можете деактивирати ову функцију у конфигурацији прозору или изабрати неки други текст едитор.

За покретање тастера на тастатури на екрану, ви само треба да померите миша преко жељеног тастера и држите га тамо неко време. Кључ ће аутоматски да се кликне после извесног времена задржавања.

У прозору за конфигурацију можете деактивирати овај ауто кликом функцију или променити задржавања времена.

Реч ауто-комплетирање и речи предвиђање

<ПРОДУЦТНАМЕ> пружа подршку за двоструку брзу типку:

> Реч ауто-Завршено: Чим сте уписали прво слово нове речи, предлози речи ће бити приказан у 10 тастера за речи које можете да куцамо по клику.

> Следећа-Реч-Сугестија: Чим сте завршили једну реч, на 10 највероватнији следеће речи ће бити приказан.

Стил писања Адаптација

<ПРОДУЦТНАМЕ> подразумевано пружа свеобухватни рјечник. Поред тога, софтвер учи нове речи и реченице као што их куцате и усваја на свој стила писања.

Осим тога, лична документа и писма могу се увозити како би софтвер прилагодили својим стилима писања чак и брже.

Фразе и Текст макрои

Можете писати кратке фразе или читаве пасусе које сте раније сачуване од стране кликом на дугме.

Више информација о овој теми можете наћи на накнадне страницама.

Говорећи (доступан само у верзији "Делуке")

У активед звучну сваки откуцана реченица ће се говорити на притиском на Ентер тастер. Ако Ентер тастер затим се поново притисне, последња реченица ће бити поново говори.

Можете конфигурирати <ПРОДУЦТНАМЕ> тако да се свака реч говори одмах након уноса.

Аутоматско покретање

Можда сте <ПРОДУЦТНАМЕ> аутоматски покренули оперативни систем Виндовс®.

Ова опција се може активирати или деактивирати у прозору за конфигурацију на картици "Додаци".

РАЗЛИКЕ за хардвер КЕИБОАРД

Ово је преглед о кључевима и функције које се не могу наћи на нормалном хардвер цомпјутер кеиборд:



Обришите слово

Брише последњи тастер



Избришите реч

Брише последњу реч



Основне поставке

Отвара прозор за конфигурацију



Цлицк-Пауза

Привремено онемогућава Ауто-Цлицк

Када се стимулише браву, Ауто-Кликните функција ће бити заустављена док се он поново активира кликом на исти тастер.




Ектендед Тастери

Показује додатне тастере (нпр. Г. Математички Кеис) и специјалне команде



Реч Тастер Схифт


Мења случај прошле куцаних реч је

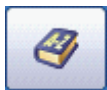

Промени речник / Промени језик

Привремено мења језик

Одговарајући тастери, речник и глас рачунара биће подешени према новоотвореном језику.

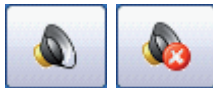

Привремено искључивање / омогућавање говора



Унесите (и говоре последњу реченицу)

МОУСЕ БАР (доступан само у верзијама "Цлицк" и "Делуке")

Ако имате проблема притиском на дугмад нормалног рачунара, можете емулирати кликове са <ПРОДУЦТНАМЕ>.

Одвојите мало времена да размислите о којој миша ћете морати да урадите (г.Е. Једноставним кликом, дупли клик., Кликните десним тастером миша или Драг & Дроп клик)..

На пример, у циљу отварања датотеке на радној површини, мораћете да урадите двоструки клик. Изаберите одговарајући клик миша (види доле), и померите показивач миша на место где треба да се уради клик. Након кратког времена миш клик ће аутоматски бити учињено на тој локацији.



Кликом на овај тастер отвара Моусе Буттон Бар:



Моусе Тип клик преглед:



Леви клик (једноставан клик)



Дупли клик



Десни клик



Драг & Дроп



Отказ клик функције и затвори дугме миша бар

Параметри Моусе Цлицк (нпр. Г. Толеранција покрет, стреле, толеранција подрхтавање, итд) може се подешавати у прозору за конфигурацију.

СПЕЕЦХ ОУТПУТ (само "Делуке" верзија)

Говорни излаз се може активирати / деактивирати кликом на следеће дугме:



У зависности од тренутног стања једна од следећих икона ће бити приказана:



Говорни излаз деактивиран



Говорни излаз активира



Говорни излаз није доступан због грешке



Глас се не чује у верзији коју сте ви покренули.

Ако је активирана функција говор излаз, сваки откуцан линија ће бити послата на говорног мотор када се уђе тастер активира.

Ако је кључ Повратак поново притисне, последња реченица ће бити поново говори.

Можете конфигурирати <ПРОДУЦТНАМЕ> тако да се свака реч говори одмах након уноса.

Гласовни рачунар који користи <ПРОДУЦТНАМЕ> може се одабрати у прозору за конфигурацију.

Ако комуницирате на више језика, можете одабрати другачији глас за сваки језик.

ФРАЗЕ

Фраза је текст модул који ће се често користе е. г. свој назив и поштанску адресу, итд

У <ПРОДУЦТНАМЕОСК> се могу поставити до 10 фраза

Подешавање фразе:

Отворите прозор за конфигурацију и кликните на картицу "Макрои текста".

Изаберите фразу са листе доступних израза, преименовати га по жељи, а заменили текст од текста по свом избору.

Затим кликните на дугме "<БУТТОННАМЕ>" испод фразе која је управо измењена.
Затим можете наставити са уређивањем други израз.

Када завршите са уређивањем фраза, кликните на дугме за конфигурацију Виндовс "Сачувај".

Типинг фразе:



Кликните на поље картица дугме.

Прилагођени фразе ће се појавити у тастера речи.

Кликнете на неки од тастера како да се његова основна текст написан.

ТЕКСТ МАЦРОС

Уз помоћ текстуалног макро функција може бити написана бесконачан број параграфа.

Доследан шема именовања се препоручује зато што ће морати да се позове на претходно написани текст касније од својих намингс.

Креирање текстуалне макроа:

Отворите прозор за конфигурацију и кликните на картицу "Макрои текста".

Кликните на дугме "Ново" у области на десној страни, а затим унесите име и текст који би требало касније написати.

Затим кликните на дугме "<БУТТОННАМЕ>".
Сада можете унети нови ставови.

Позивајући Текст макроа:

Кликните на Схарп Упис (#) на тастатури.
Ако Схарп знак није видљив, кликните на тастер Схифт.

Почети да уносите назив текстуалне макро док не појави у једном од тастера за 10 речи предвиђања.

Кликните на дугме одговарајућу реч предвиђања да имају складиште текст написан напоље.

Ако нема текста мацрос (текст макрои све почети са Схарп карактера (#)) су приказани у дугмету реч предвиђања, још увек постоје слова у бафер. У том случају кликните на тастер Ентер, а затим кликните на Схарп знак, и почети од поново почиње.

НОВОСТИ

Овај сајт пружа периодичне новости о слободним исправке и нове функције:

<https://www.onscreenkeys.com>

КРИТИКА и сугестије

Било би нам драго ако нам кажете да ли нешто о нашем софтверу савршено не одговара вашим потребама или ако имате било какве приједлоге како побољшати <ПРОДУЦТНАМЕ>.

Напишите емаил

mail@tomwebersoftware.com

ПОДРШКА

Ваш савјетник / дистрибутер:

Ручна верзија: <МАНУАЛВЕРСИОН> (од <МОНТХНАМЕ> <ИЕАР>)